



VENOSAN

Catalogue général

Contenu

Bas et collants compressifs médicaux	04	Comment effectuer une prise de mesures correcte Informations pour la prescription
	06	Toute la gamme, couleurs et modèles
	08	Vue d'ensemble de l'assortiment bas compressifs
	10	VENOSAN 3000 COTTON NATURAL LOOK
	12	VENOSAN 4000 CLIMATE EFFECT
	17	VENOSAN 5000 THE MAGIC OF SILVER
	22	VENOSAN 6000 CLASSIC
	24	VENOSAN 7000 NATURAL TOUCH
Bas compressifs médicaux pour le bras	28	VENOSAN 8000 ULCERFIT SUCCESSFUL THERAPY
	30	Comment effectuer une prise de mesures correcte
	31	VENOSAN 4000 CLIMATE EFFECT
Bas de soutien médicaux	32	VENOSAN 7000 NATURAL TOUCH
	34	Vue d'ensemble de l'assortiment bas de soutien
	36	VENOSAN LEGLINE 20 / 30 ELEGANT LUXURY
	40	VENOSAN SILK SUPPORT TRAVEL & LEISURE
Chaussettes de voyage	42	VENOSAN COTTON SUPPORT TRAVEL & LEISURE
	44	VENOSAN JET LEGS TRAVEL WITH COMFORT SOCKS
Accessoires	45	Pour les bas de compression Soins de la peau lors du traitement compressif
Bas anti-embolie	48	VENOSAN AES
Informations	50	Conditions générales de vente Règlement des retours

Comment effectuer une prise de mesures correcte

Bas compressifs médicaux

Quand ?

En cas de forte tendance aux œdèmes, la mesure est à prendre le matin.

Comment ?

Debout avec un mètre ruban.

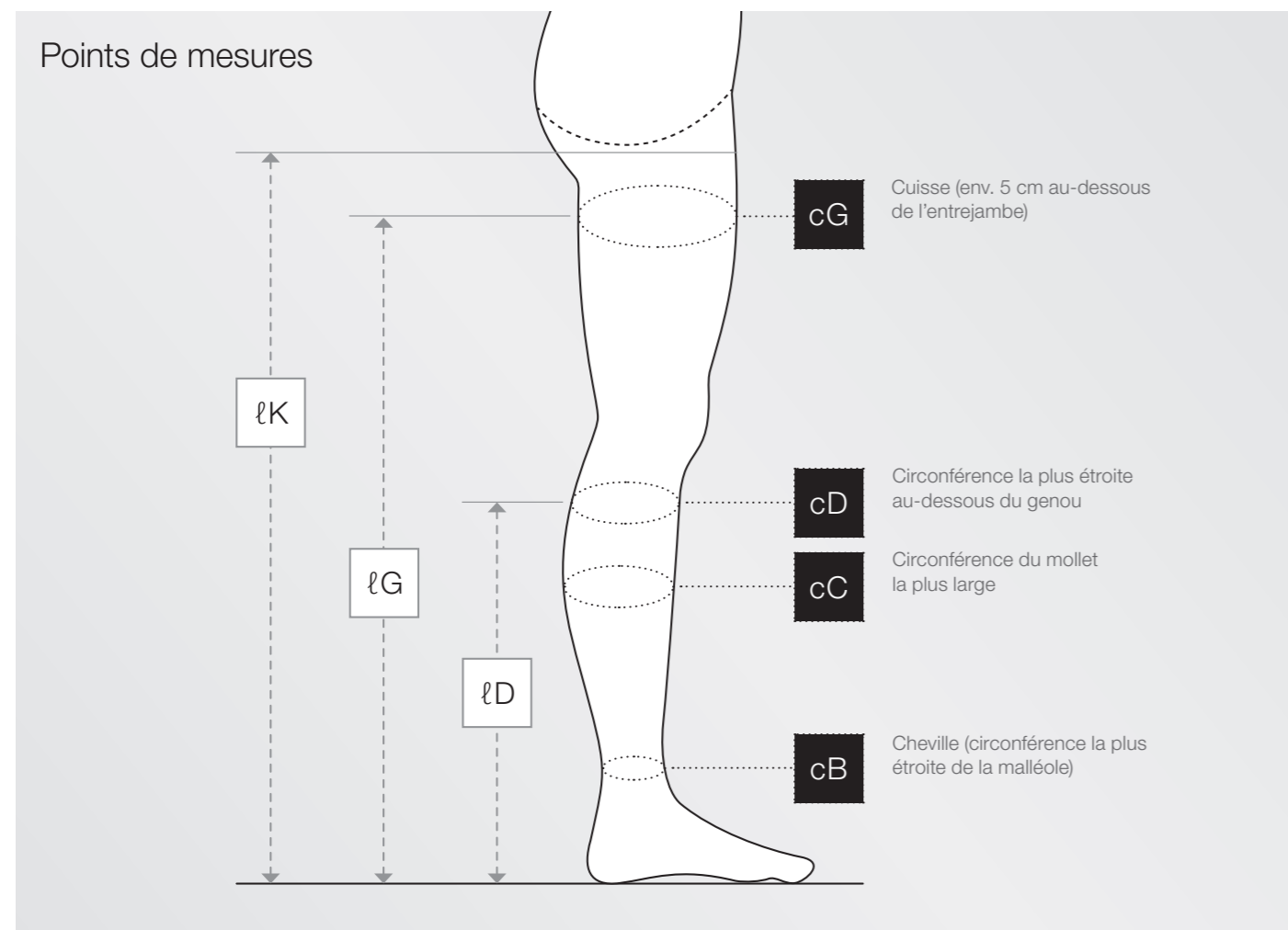


Tableau des mesures anatomiques

Mesures de longueurs

Mesure	Version	Longueur (cm)
lD	AD / ADH court	35 - 40
	AD / ADH long	37 - 42
lG	AGH court	63 - 72
	AGH long	68 - 78
lK	AGG / AT / ATU Materna court	67 - 74
	AGG / AT / ATU Materna long	74 - 85

Mesures de circonférences

Mesure	S (cm)	M (cm)	L (cm)	XL (cm)
cB	20 - 23	23 - 26	26 - 29	29 - 31
cC	29 - 39	33 - 42	36 - 45	39 - 47
cD	28 - 38	32 - 41	35 - 44	38 - 46
cG	48 - 63	54 - 67	58 - 72	63 - 74

Coupe

Tailles

Il est important que nous réalisons la pression prescrite par le médecin avec les différences de pression correctes. La pression exercée sur la jambe est déterminée par 2 facteurs :


- La loi physique (Laplace) selon laquelle, à élasticité constante, la pression diminue lorsque la surface augmente et inversement.
- Lorsque l'étirement (allongement transversal) est plus important, la compression augmente, et inversement.

L'un des effets est donc partiellement compensé par l'autre : plus grande circonférence = perte de pression à cause de la circonférence, mais gain de pression à cause de l'étirement plus important de la maille.

Longueur

Les produits VENOSAN ont un allongement longitudinal élevé et souple, et s'adaptent sans problème et sans glisser à toutes les longueurs de jambes. De plus, nos mesures comparatives montrent qu'avec des différences de longueur de +/- 3 cm la pression ne varie que de 3 - 5 %.

Où mesurer ?

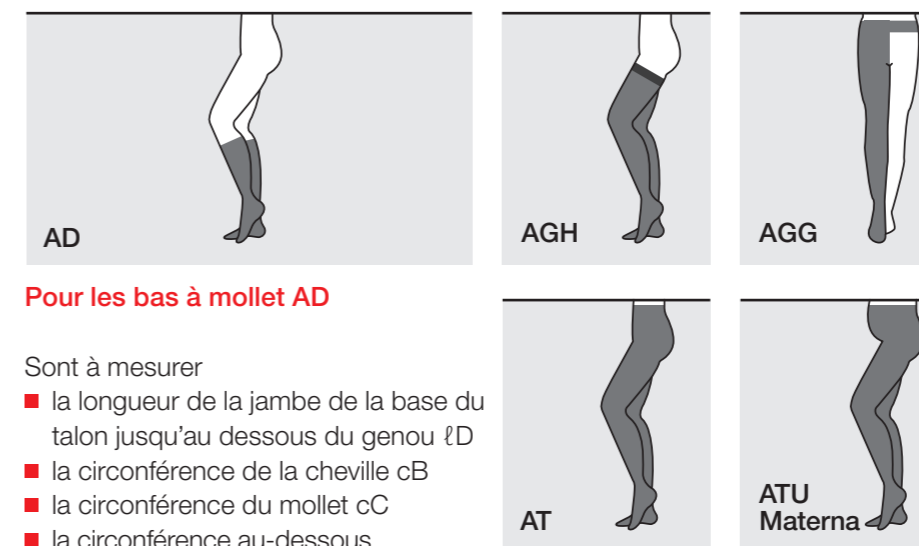

Pour les bas à cuisse avec bande adhésive AGH, les bas à cuisse avec ceinture AGG, les collants AT et les collants de grossesse ATU Materna

Sont à mesurer

- la longueur lG pour AG et AGH ;
- la longueur lK pour AGG, AT et ATU Materna
- la circonférence de la cheville cB
- la circonférence du mollet cC
- la circonférence au-dessous du genou cD
- la circonférence de la cuisse cG

Pour les bas à mollet AD

Sont à mesurer

- la longueur de la jambe de la base du talon jusqu'au dessous du genou lD
- la circonférence de la cheville cB
- la circonférence du mollet cC
- la circonférence au-dessous du genou cD

Consultez ensuite le tableau des mesures

- dans quelle colonne de taille se trouve le tour de cheville cB mesuré (Small, Medium, Large ou X-Large)
- dans quelle colonne se trouvent les autres mesures cC, cD et cG


Informations pour la prescription

Les bas compressifs médicaux figurent sur la liste des moyens et appareils (LiMA) et sont prix en charge complètement ou partiellement par toutes les caisses de maladie (2 paires par année).

Toute la gamme

Bas et collants compressifs médicaux

Modèles :

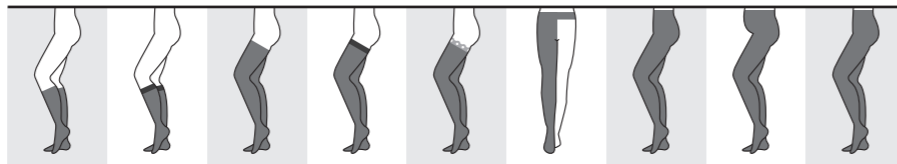

Ligne	CCL	Pression à la cheville (mmHg)	AD	ADH	AG	AGH	AGH	AGG	AT	ATU Materna	ATH
VENOSAN 3000 COTTON NATURAL LOOK	CCL 2	23 – 32	●	●	○	●	○	○	○		○
	CCL 3	34 – 46	●	○	○	○	○	○	○		○
VENOSAN 4000 CLIMATE EFFECT	CCL 1	18 – 21	●	●	○	●	●	○	●	●	
	CCL 2	23 – 32	●	●	○	●	●	●	●	●	
VENOSAN 5000 THE MAGIC OF SILVER	CCL 1	18 – 21	●	●	○	●	●	●	●	○	
	CCL 2	23 – 32	●	●	○	●	●	●	●	○	
	CCL 3	34 – 46	●	○	○	○	○	○	○	○	
VENOSAN 6000 CLASSIC	CCL 2	23 – 32	⊙			⊙		⊙			
VENOSAN 7000 NATURAL TOUCH	CCL 1	18 – 21	⊙								
	CCL 2	23 – 32	●	●	○	●	○	●	○		○
	CCL 3	34 – 46	●	●	○	●	○	○	○		○
VENOSAN 8000 ULCERFIT SUCCESSFUL THERAPY	CCL 2	23 – 32	⊙								
	CCL 3	34 – 46	⊙								

- ⊙ Uniquement disponibles en modèles standards
- Disponibles en modèles standards et sur mesure
- Uniquement disponibles sur mesure


Couleurs et modèles

Bas et collants compressifs médicaux


Couleurs :

Ligne	Couleurs	Notes
VENOSAN 3000 COTTON NATURAL LOOK	Beige	Pour des raisons techniques d'imprimerie, des différences de couleurs sont possibles.
VENOSAN 4000 CLIMATE EFFECT	Mexico	[Color swatches: Mexico, Marokko, Sand, Black, Marine, Anthracite]
	Marokko	
	Sand	
	Black	
	Marine	
	Anthracite	
VENOSAN 5000 THE MAGIC OF SILVER	Mexico	[Color swatches: Mexico, Marokko, Sand, Black]
	Marokko	
	Sand	
	Black	
VENOSAN 6000 CLASSIC	Beige	[Color swatches: Beige, Black]
	Black	
VENOSAN 7000 NATURAL TOUCH	Beige	[Color swatches: Beige, Black]
	Black	
VENOSAN 8000 ULCERFIT SUCCESSFUL THERAPY	Beige	[Color swatch: Beige]


Modèles :

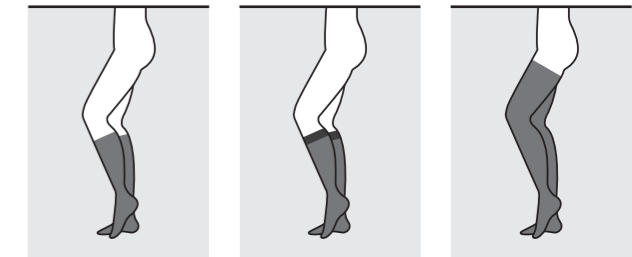

- AD**
Bas à mollet
- ADH**
Bas à mollet avec bande adhésive noppée
- AG**
Bas à cuisse

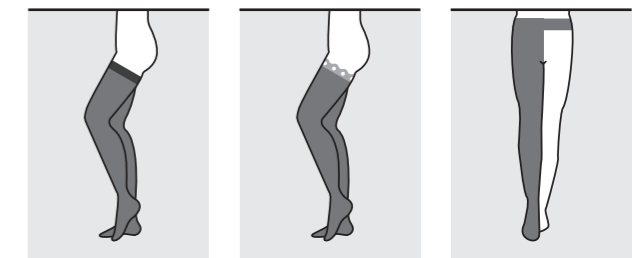

- AGH**
Bas à cuisse avec bande adhésive noppée
- AGH**
Bas à cuisse avec bande adhésive ornée
- AGG**
Bas à cuisse avec ceinture

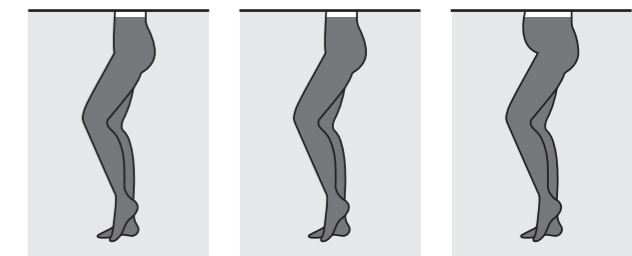

- AT**
Collant
- ATH**
Collant pour hommes
- ATU Materna**
Collant de grossesse

Vue d'ensemble de l'assortiment

Bas et collants compressifs médicaux

VENOSAN® 3000 COTTON

NATURAL LOOK

- Résistant
- 100% coton à même la peau
- Absorbe l'humidité
- Robuste
- Facile à enfiler

Indications

- IVC (Insuffisance veineuse chronique) 2-3
- Lipœdème stade 2-3
- Post-opératoire
- PTS (Syndrome post-thrombotique)
- Œdème lymphatique léger



CCL 2 CCL 3

Composition

CCL 2 49% coton
27% Nylon polyamide
24% élasthanne
CCL 3 40% coton
27% Nylon polyamide
33% élasthanne

VENOSAN® 6000

CLASSIC

- Légère transparence
- Assise parfaite
- Manipulation simple
- Respecte la norme GZG (Association allemande pour la qualité des bas compressifs médicaux)

Indications

- IVC (Insuffisance veineuse chronique) 1
- Troubles légers
- Post-opératoire
- Grossesse



CCL 2

Composition

70% nylon polyamide
30% élasthanne

VENOSAN® 4000

CLIMATE EFFECT

- Thermorégulateur
- Semi-transparent
- Confortable
- Extrêmement extensible

Indications

- IVC (Insuffisance veineuse chronique) 1
- Grossesse
- Troubles légers
- Post-opératoire



CCL 1 CCL 2

Composition

71% TACTEL® polyamide
29% élasthanne

VENOSAN® 7000

NATURAL TOUCH

- Grande rigidité
- Robuste
- Agréable à la peau
- Thermorégulateur

Indications

- IVC (Insuffisance veineuse chronique) 2-3
- Lipœdème stade 2-3
- Post-opératoire
- Après thrombose aiguë (après pansement)
- PTS (Syndrome post-thrombotique)
- Œdème lymphatique léger
- Charge orthostatique prononcée



CCL 1 CCL 2 CCL 3

Composition

62% TACTEL® polyamide
26% élasthanne
8% coton
4% SeaCell® (fibre d'algues)

VENOSAN® 5000

THE MAGIC OF SILVER

- Anti-odeur
- Antistatique
- Thermorégulateur
- Antibactérien

Indications

- IVC (Insuffisance veineuse chronique) 1-2
- Post-opératoire
- Affections cutanées mineures
- Lipœdème stade 1



CCL 1 CCL 2 CCL 3

Composition

40% TACTEL® polyamide
30% élasthanne
20% coton
10% X-Static® - The Silver Fiber

VENOSAN® 8000 ULCERFIT

SUCCESSFUL THERAPY

Sous-bas

- Fixe les pansements
- Protège la peau sensible
- Peut être porté la nuit

Sur-bas

- Grande rigidité
- Robuste
- Thermorégulateur

Indications

- Ulcus cruris venosum



CCL 2 CCL 3

Composition

Sur-bas : 62% TACTEL® polyamide,
26% élasthanne, 8% coton,
4% SeaCell® (fibre d'algues)
Sous-bas : 90% polyamide,
10% élasthanne

NATURAL LOOK VENOSAN® 3000 COTTON

Coton – naturel et souple

■ **Naturel**

Le coton améliore le confort de port chez tous les patients qui préfèrent sentir sur la peau une matière naturelle et/ou qui sont allergiques aux fibres synthétiques. 100 % de coton sur la peau.

■ **Résistant**

La structure robuste convainc par sa résistance et son adaptation aux contraintes et est idéale pour un traitement de compression durable.

■ **Faciles à enfiler**

Le tricot coton élastique permet d'enfiler facilement vos bas compressifs.

Composition

CCL 2 : 49 % coton, 27 % Nylon polyamide, 24 % élasthanne

CCL 3 : 40 % coton, 27 % Nylon polyamide, 33 % élasthanne



Couleur

Beige

Assortiment standard

VENOSAN® 3000 COTTON

Classe de compression 2 : Pression à la cheville 23 – 32 mmHg

CCL 2

Article	Couleur	Longueur	Pointe de pied	Bande adhésive	REF / Taille			
					S	M	L	XL
AD	Beige	long	ouverte	–	SB 32001	SB 32002	SB 32003	SB 32004
		long	fermée	–	SB 32011	SB 32012	SB 32013	SB 32014
		court	ouverte	–	SB 32021	SB 32022	SB 32023	SB 32024
		court	fermée	–	SB 32031	SB 32032	SB 32033	SB 32034
Position de la LiMA : 17.02.01.01.1								
ADH	Beige	long	ouverte	noppée	SB 32041	SB 32042	SB 32043	SB 32044
		long	fermée	noppée	SB 32051	SB 32052	SB 32053	SB 32054
		court	ouverte	noppée	SB 32061	SB 32062	SB 32063	SB 32064
		court	fermée	noppée	SB 32071	SB 32072	SB 32073	SB 32074
Position de la LiMA : 17.02.01.01.1								
AGH	Beige	long	ouverte	noppée	SB 32601	SB 32602	SB 32603	SB 32604
		court	ouverte	noppée	SB 32621	SB 32622	SB 32623	SB 32624
Position de la LiMA : 17.02.01.05.1								

VENOSAN® 3000 COTTON

Classe de compression 3 : Pression à la cheville 34 – 46 mmHg

CCL 3

Article	Couleur	Longueur	Pointe de pied	Bande adhésive	REF / Taille			
					S	M	L	XL
AD	Beige	long	ouverte	–	SB 33001	SB 33002	SB 33003	SB 33004
		court	ouverte	–	SB 33021	SB 33022	SB 33023	SB 33024
Position de la LiMA : 17.03.01.01.1								

Bas sur mesure

VENOSAN® 3000 COTTON

sur mesure.

CCL 2

CCL 3

Article	Couleur	Pointe de pied	CCL 2	CCL 3
AD	Beige	ouverte/fermée	●	●
ADH		ouverte/fermée	●	●
AG		ouverte/fermée	●	●
AGH		ouverte/fermée	●	●
AGG		ouverte/fermée	●	●
AT		ouverte/fermée	●	●
ATH		ouverte/fermée	●	●

● = disponible

Modèles sur mesure



CLIMATE EFFECT VENOSAN® 4000

Microfibre – confortable et à la mode

■ **Thermorégulateur**

Grâce à son pouvoir d'évacuation de l'humidité vers l'extérieur, l'effet Tactel® climate assure un confort de port incomparable.

■ **Extrêmement élastique**

S'enfile facilement grâce au rapport effort-extension plat de la maille.

■ **Confortable**

La matière et l'aspect élégant assurent un confort de port élevé.

Composition

71 % TACTEL® polyamide, 29 % élasthanne



Couleurs

Mexico	Black
Marokko	Marine
Sand	Anthracite

également disponible en couleurs tendance






Assortiment standard

VENOSAN® 4000

Classe de compression 1 : Pression à la cheville 18 – 21 mmHg



Article	Couleur	Longueur	Pointe de pied	Bande adhésive	REF / Taille			
					S	M	L	XL
AD 	Mexico	long	ouverte	–	SG 41001	SG 41002	SG 41003	SG 41004
		long	fermée	–	SG 41011	SG 41012	SG 41013	SG 41014
		court	ouverte	–	SG 41021	SG 41022	SG 41023	SG 41024
		court	fermée	–	SG 41031	SG 41032	SG 41033	SG 41034
	Marokko	long	ouverte	–	SM 41001	SM 41002	SM 41003	SM 41004
		long	fermée	–	SM 41011	SM 41012	SM 41013	SM 41014
		court	ouverte	–	SM 41021	SM 41022	SM 41023	SM 41024
		court	fermée	–	SM 41031	SM 41032	SM 41033	SM 41034
	Sand	long	ouverte	–	SD 41001	SD 41002	SD 41003	SD 41004
		long	fermée	–	SD 41011	SD 41012	SD 41013	SD 41014
		court	ouverte	–	SD 41021	SD 41022	SD 41023	SD 41024
		court	fermée	–	SD 41031	SD 41032	SD 41033	SD 41034
Black	long	ouverte	–	SN 41001	SN 41002	SN 41003	SN 41004	
	long	fermée	–	SN 41011	SN 41012	SN 41013	SN 41014	
	court	ouverte	–	SN 41021	SN 41022	SN 41023	SN 41024	
	court	fermée	–	SN 41031	SN 41032	SN 41033	SN 41034	
ADH 	Mexico	long	ouverte	noppée	SG 41041	SG 41042	SG 41043	SG 41044
		long	fermée	noppée	SG 41051	SG 41052	SG 41053	SG 41054
		court	ouverte	noppée	SG 41061	SG 41062	SG 41063	SG 41064
		court	fermée	noppée	SG 41071	SG 41072	SG 41073	SG 41074
	Marokko	long	ouverte	noppée	SM 41041	SM 41042	SM 41043	SM 41044
		long	fermée	noppée	SM 41051	SM 41052	SM 41053	SM 41054
		court	ouverte	noppée	SM 41061	SM 41062	SM 41063	SM 41064
		court	fermée	noppée	SM 41071	SM 41072	SM 41073	SM 41074
	Black	long	ouverte	noppée	SN 41041	SN 41042	SN 41043	SN 41044
		long	fermée	noppée	SN 41051	SN 41052	SN 41053	SN 41054
		court	ouverte	noppée	SN 41061	SN 41062	SN 41063	SN 41064
		court	fermée	noppée	SN 41071	SN 41072	SN 41073	SN 41074
AGH 	Mexico	long	fermée	ornée	SG 41601	SG 41602	SG 41603	SG 41604
		long	ouverte	noppée	SG 41611	SG 41612	SG 41613	SG 41614
		long	fermée	noppée	SG 41621	SG 41622	SG 41623	SG 41624
		court	fermée	ornée	SG 41631	SG 41632	SG 41633	SG 41634
		court	ouverte	noppée	SG 41641	SG 41642	SG 41643	SG 41644
		court	fermée	noppée	SG 41651	SG 41652	SG 41653	SG 41654
	Marokko	long	fermée	ornée	SM 41601	SM 41602	SM 41603	SM 41604
		long	ouverte	noppée	SM 41611	SM 41612	SM 41613	SM 41614
		long	fermée	noppée	SM 41621	SM 41622	SM 41623	SM 41624
		court	fermée	ornée	SM 41631	SM 41632	SM 41633	SM 41634
		court	ouverte	noppée	SM 41641	SM 41642	SM 41643	SM 41644
		court	fermée	noppée	SM 41651	SM 41652	SM 41653	SM 41654
Sand	long	fermée	ornée	SD 41601	SD 41602	SD 41603	SD 41604	
	long	ouverte	noppée	SD 41611	SD 41612	SD 41613	SD 41614	
	long	fermée	noppée	SD 41621	SD 41622	SD 41623	SD 41624	
	court	fermée	ornée	SD 41631	SD 41632	SD 41633	SD 41634	
	court	ouverte	noppée	SD 41641	SD 41642	SD 41643	SD 41644	
	court	fermée	noppée	SD 41651	SD 41652	SD 41653	SD 41654	

Assortiment standard

VENOSAN® 4000

Classe de compression 1 : Pression à la cheville 18 – 21 mmHg



Article	Couleur	Longueur	Pointe de pied	Bande adhésive	REF / Taille			
					S	M	L	XL
AGH	Black	long	ouverte	noppée	SN 41611	SN 41612	SN 41613	SN 41004
		long	fermée	noppée	SN 41621	SN 41622	SN 41623	SN 41624
		long	fermée	ornée	SN 41601	SN 41602	SN 41603	SN 41604
		court	ouverte	noppée	SN 41641	SN 41642	SN 41643	SN 41644
		court	fermée	noppée	SN 41651	SN 41652	SN 41653	SN 41654
		court	fermée	ornée	SN 41631	SN 41632	SN 41633	SN 41634
AT	Mexico	long	fermée	-	SG 41221	SG 41222	SG 41223	SG 41224
		court	fermée	-	SG 41231	SG 41232	SG 41233	SG 41234
	Marokko	long	fermée	-	SM 41221	SM 41222	SM 41223	SM 41224
		court	fermée	-	SM 41231	SM 41232	SM 41233	SM 41234
	Sand	long	fermée	-	SD 41221	SD 41222	SD 41223	SD 41224
		court	fermée	-	SD 41231	SD 41232	SD 41233	SD 41234
Black	long	fermée	-	SN 41221	SN 41222	SN 41223	SN 41224	
	court	fermée	-	SN 41231	SN 41232	SN 41233	SN 41234	
ATU Materna	Mexico	long	fermée	-	SG 41301	SG 41302	SG 41303	SG 41304
	Black	long	fermée	-	SG 41301	SG 41302	SG 41303	SG 41304

VENOSAN® 4000

Classe de compression 2 : Pression à la cheville 23 – 32 mmHg



Article	Couleur	Longueur	Pointe de pied	Bande adhésive	REF / Taille			
					S	M	L	XL
AD	Mexico	long	ouverte	-	SG 42001	SG 42002	SG 42003	SG 42004
		long	fermée	-	SG 42011	SG 42012	SG 42013	SG 42014
		court	ouverte	-	SG 42021	SG 42022	SG 42023	SG 42024
		court	fermée	-	SG 42031	SG 42032	SG 42033	SG 42034
	Marokko	long	ouverte	-	SM 42001	SM 42002	SM 42003	SM 42004
		long	fermée	-	SM 42011	SM 42012	SM 42013	SM 42014
		court	ouverte	-	SM 42021	SM 42022	SM 42023	SM 42024
		court	fermée	-	SM 42031	SM 42032	SM 42033	SM 42034
	Sand	long	ouverte	-	SD 42001	SD 42002	SD 42003	SD 42004
		long	fermée	-	SD 42011	SD 42012	SD 42013	SD 42014
		court	ouverte	-	SD 42021	SD 42022	SD 42023	SD 42024
		court	fermée	-	SD 42031	SD 42032	SD 42033	SD 42034
	Black	long	ouverte	-	SN 42001	SN 42002	SN 42003	SN 42004
		long	fermée	-	SN 42011	SN 42012	SN 42013	SN 42014
		court	ouverte	-	SN 42021	SN 42022	SN 42023	SN 42024
		court	fermée	-	SN 42031	SN 42032	SN 42033	SN 42034
	Anthracite	long	ouverte	-	SA 42001	SA 42002	SA 42003	SA 42004
		long	fermée	-	SA 42011	SA 42012	SA 42013	SA 42014
		court	ouverte	-	SA 42021	SA 42022	SA 42023	SA 42024
		court	fermée	-	SA 42031	SA 42032	SA 42033	SA 42034
Marine	long	ouverte	-	SI 42001	SI 42002	SI 42003	SI 42004	
	long	fermée	-	SI 42011	SI 42012	SI 42013	SI 42014	
	court	ouverte	-	SI 42021	SI 42022	SI 42023	SI 42024	
	court	fermée	-	SI 42031	SI 42032	SI 42033	SI 42034	

Position de la LiMA : 17.02.01.01.1

VENOSAN® 4000

Classe de compression 2 : Pression à la cheville 23 – 32 mmHg



Article	Couleur	Longueur	Pointe de pied	Bande adhésive	REF / Taille			
					S	M	L	XL
ADH	Mexico	long	ouverte	noppée	SG 42041	SG 42042	SG 42043	SG 42044
		long	fermée	noppée	SG 42051	SG 42052	SG 42053	SG 42054
		court	ouverte	noppée	SG 42061	SG 42062	SG 42063	SG 42064
		court	fermée	noppée	SG 42071	SG 42072	SG 42073	SG 42074
	Marokko	long	ouverte	noppée	SM 42041	SM 42042	SM 42043	SM 42044
		long	fermée	noppée	SM 42051	SM 42052	SM 42053	SM 42054
		court	ouverte	noppée	SM 42061	SM 42062	SM 42063	SM 42064
		court	fermée	noppée	SM 42071	SM 42072	SM 42073	SM 42074
	Black	long	ouverte	noppée	SN 42041	SN 42042	SN 42043	SN 42044
		long	fermée	noppée	SN 42051	SN 42052	SN 42053	SN 42054
		court	ouverte	noppée	SN 42061	SN 42062	SN 42063	SN 42064
		court	fermée	noppée	SN 42071	SN 42072	SN 42073	SN 42074
Position de la LiMA : 17.02.01.01.1								
AGH	Mexico	long	fermée	ornée	SG 42601	SG 42602	SG 42603	SG 42604
		long	ouverte	noppée	SG 42611	SG 42612	SG 42613	SG 42614
		long	fermée	noppée	SG 42621	SG 42622	SG 42623	SG 42624
		court	fermée	ornée	SG 42631	SG 42632	SG 42633	SG 42634
	Marokko	court	ouverte	noppée	SG 42641	SG 42642	SG 42643	SG 42644
		court	fermée	noppée	SG 42651	SG 42652	SG 42653	SG 42654
		long	fermée	ornée	SM 42601	SM 42602	SM 42603	SM 42604
		long	ouverte	noppée	SM 42611	SM 42612	SM 42613	SM 42614
	Sand	long	fermée	noppée	SM 42621	SM 42622	SM 42623	SM 42624
		court	fermée	ornée	SM 42631	SM 42632	SM 42633	SM 42634
		court	ouverte	noppée	SM 42641	SM 42642	SM 42643	SM 42644
		court	fermée	noppée	SM 42651	SM 42652	SM 42653	SM 42654
	Anthracite	long	ouverte	noppée	SD 42601	SD 42602	SD 42603	SD 42604
		long	ouverte	noppée	SD 42611	SD 42612	SD 42613	SD 42614
		long	fermée	noppée	SD 42621	SD 42622	SD 42623	SD 42624
		court	fermée	ornée	SD 42631	SD 42632	SD 42633	SD 42634
	Marine	court	ouverte	noppée	SD 42641	SD 42642	SD 42643	SD 42644
		court	fermée	noppée	SD 42651	SD 42652	SD 42653	SD 42654
		long	fermée	ornée	SN 42601	SN 42602	SN 42603	SN 42604
		long	ouverte	noppée	SN 42611	SN 42612	SN 42613	SN 42614
Black	long	ouverte	noppée	SN 42621	SN 42622	SN 42623	SN 42624	
	court	fermée	ornée	SN 42631	SN 42632	SN 42633	SN 42634	
	court	ouverte	noppée	SN 42641	SN 42642	SN 42643	SN 42644	
	court	fermée	noppée	SN 42651	SN 42652	SN 42653	SN 42654	
Marine	long	ouverte	noppée	SA 42611	SA 42612	SA 42613	SA 42614	
	long	fermée	noppée	SA 42621	SA 42622	SA 42623	SA 42624	
	long	ouverte	noppée	SA 42641	SA 42642	SA 42643	SA 42644	
	court	fermée	ornée	SA 42651	SA 42652	SA 42653	SA 42654	
AGG (gauche)	Mexico	long	ouverte	-	SI 42601	SI 42602	SI 42603	SI 42604
		long	fermée	noppée	SI 42621	SI 42622	SI 42623	SI 42624
		court	ouverte	noppée	SI 42641	SI 42642	SI 42643	SI 42644
		court	fermée	noppée	SI 42651	SI 42652	SI 42653	SI 42654
AGG (droit)	Mexico	long	ouverte	-	SI 42601	SI 42602	SI 42603	SI 42604
		long	fermée	ornée	SI 42621	SI 42622	SI 42623	SI 42624
		court	ouverte	noppée	SI 42641	SI 42642	SI 42643	SI 42644
		court	fermée	ornée	SI 42651	SI 42652	SI 42653	SI 42654

Position de la LiMA : 17.02.01.05.1

VENOSAN® 4000

Classe de compression 2 : Pression à la cheville 23 – 32 mmHg

CCL 2

Article	Couleur	Longueur	Pointe de pied	Bande adhésive	REF / Taille				
					S	M	L	XL	
AT	Mexico	long	fermée	–	SG 42221	SG 42222	SG 42223	SG 42224	
		court	fermée	–	SG 42231	SG 42232	SG 42233	SG 42234	
	Marokko	long	fermée	–	SM 42221	SM 42222	SM 42223	SM 42224	
		court	fermée	–	SM 42231	SM 42232	SM 42233	SM 42234	
	Sand	long	fermée	–	SD 42221	SD 42222	SD 42223	SD 42224	
		court	fermée	–	SD 42231	SD 42232	SD 42233	SD 42234	
	Black	long	fermée	–	SN 42221	SN 42222	SN 42223	SN 42224	
		court	fermée	–	SN 42231	SN 42232	SN 42233	SN 42234	
	Position de la LiMA : 17.02.01.07.1								
	ATU Materna	Mexico	long	fermée	–	SG 42301	SG 42302	SG 42303	SG 42304
court			fermée	–	SG 42311	SG 42312	SG 42313	SG 42314	
Black		long	fermée	–	SN 42301	SN 42302	SN 42303	SN 42304	
		court	fermée	–	SN 42311	SN 42312	SN 42313	SN 42314	
Position de la LiMA : 17.02.01.09.1									

Bas sur mesure

VENOSAN® 4000

sur mesure.

CCL 1

CCL 2

Article	Couleur	Pointe de pied	CCL 1	CCL 2
AD		ouverte/fermée	•	•
ADH	CCL 1 Mexico, Black	ouverte/fermée	•	•
AG		ouverte/fermée	•	•
AGH	CCL 2 Mexico, Marokko, AT	ouverte/fermée	•	•
AGG+		ouverte/fermée	•	•
AT		ouverte/fermée	•	•
ATU Materna	Sand, Black	ouverte/fermée	•	•

+ disponible uniquement en Mexico et Black

• = disponible

Modèles sur mesure



CCL 1 CCL 2 CCL 3

THE MAGIC OF SILVER
VENOSAN® 5000

Fibre d'argent & de coton – antibactérien

- **Effet antibactérien et bioactif**
Les fibres d'argent favorisent l'hygiène des pieds et des jambes et exercent un effet anti-odeur et anti-infectieux.
- **Régulation thermique**
Le bas à mailles fines exerce un effet thermorégulateur et transporte l'humidité de l'intérieur vers l'extérieur, contribuant ainsi à une température idéale et un confort de port optimal.
- **Antistatique**
Grâce à la conductibilité élevée de l'argent, les fibres X-Static vous évitent les décharges d'électricité statique.

Composition

40% TACTEL® polyamide, 30% élasthane, 20% coton
10% X-Static® – The Silver Fiber™

Couleurs

Mexico	Sand
Marokko	Black






Assortiment standard

VENOSAN® 5000

Classe de compression 1 : Pression à la cheville 18 – 21 mmHg

CCL 1




Article	Couleur	Longueur	Pointe de pied	Bande adhésive	REF / Taille				
					S	M	L	XL	
AD 	Mexico	long	ouverte	–	SG 45001	SG 45002	SG 45003	SG 45004	
		long	fermée	–	SG 45011	SG 45012	SG 45013	SG 45014	
		court	ouverte	–	SG 45021	SG 45022	SG 45023	SG 45024	
		court	fermée	–	SG 45031	SG 45032	SG 45033	SG 45034	
	Marokko	long	ouverte	–	SM 45001	SM 45002	SM 45003	SM 45004	
		long	fermée	–	SM 45011	SM 45012	SM 45013	SM 45014	
		court	ouverte	–	SM 45021	SM 45022	SM 45023	SM 45024	
		court	fermée	–	SM 45031	SM 45032	SM 45033	SM 45034	
	Sand	long	ouverte	–	SD 45001	SD 45002	SD 45003	SD 45004	
		long	fermée	–	SD 45011	SD 45012	SD 45013	SD 45014	
		court	ouverte	–	SD 45021	SD 45022	SD 45023	SD 45024	
		court	fermée	–	SD 45031	SD 45032	SD 45033	SD 45034	
	Black	long	ouverte	–	SN 45001	SN 45002	SN 45003	SN 45004	
		long	fermée	–	SN 45011	SN 45012	SN 45013	SN 45014	
		court	ouverte	–	SN 45021	SN 45022	SN 45023	SN 45024	
		court	fermée	–	SN 45031	SN 45032	SN 45033	SN 45034	
ADH 	Mexico	long	ouverte	noppée	SG 45041	SG 45042	SG 45043	SG 45044	
		long	fermée	noppée	SG 45051	SG 45052	SG 45053	SG 45054	
		court	ouverte	noppée	SG 45061	SG 45062	SG 45063	SG 45064	
		court	fermée	noppée	SG 45071	SG 45072	SG 45073	SG 45074	
	Marokko	long	ouverte	noppée	SM 45041	SM 45042	SM 45043	SM 45044	
		long	fermée	noppée	SM 45051	SM 45052	SM 45053	SM 45054	
		court	ouverte	noppée	SM 45061	SM 45062	SM 45063	SM 45064	
		court	fermée	noppée	SM 45071	SM 45072	SM 45073	SM 45074	
	Black	long	ouverte	noppée	SN 45041	SN 45042	SN 45043	SN 45044	
		long	fermée	noppée	SN 45051	SN 45052	SN 45053	SN 45054	
		court	ouverte	noppée	SN 45061	SN 45062	SN 45063	SN 45064	
		court	fermée	noppée	SN 45071	SN 45072	SN 45073	SN 45074	
	AGH 	Mexico	long	fermée	ornée	SG 45601	SG 45602	SG 45603	SG 45604
			long	ouverte	noppée	SG 45611	SG 45612	SG 45613	SG 45614
			court	fermée	ornée	SG 45631	SG 45632	SG 45633	SG 45634
			court	ouverte	noppée	SG 45641	SG 45642	SG 45643	SG 45644
Marokko		long	fermée	ornée	SM 45601	SM 45602	SM 45603	SM 45604	
		long	ouverte	noppée	SM 45611	SM 45612	SM 45613	SM 45614	
		court	fermée	ornée	SM 45631	SM 45632	SM 45633	SM 45634	
		court	ouverte	noppée	SM 45641	SM 45642	SM 45643	SM 45644	
Sand		long	fermée	ornée	SD 45601	SD 45602	SD 45603	SD 45604	
		long	ouverte	noppée	SD 45611	SD 45612	SD 45613	SD 45614	
		court	fermée	ornée	SD 45631	SD 45632	SD 45633	SD 45634	
		court	ouverte	noppée	SD 45641	SD 45642	SD 45643	SD 45644	
Black		long	fermée	ornée	SN 45601	SN 45602	SN 45603	SN 45604	
		long	ouverte	noppée	SN 45611	SN 45612	SN 45613	SN 45614	
		court	fermée	ornée	SN 45631	SN 45632	SN 45633	SN 45634	
		court	ouverte	noppée	SN 45641	SN 45642	SN 45643	SN 45644	

Assortiment standard

VENOSAN® 5000

Classe de compression 1 : Pression à la cheville 18 – 21 mmHg



CCL 1

Article	Couleur	Longueur	Pointe de pied	Bande adhésive	REF / Taille			
					S	M	L	XL
AGG (gauche) 	Mexico	long	ouverte	–	SG 45151	SG 45152	SG 45153	SG 45154
AGG (droit) 		long	ouverte	–	SG 45171	SG 45172	SG 45173	SG 45174
AT 	Mexico	long	fermée	–	SG 45221	SG 45222	SG 45223	SG 45224
		court	fermée	–	SG 45231	SG 45232	SG 45233	SG 45234
	Marokko	long	fermée	–	SM 45221	SM 45222	SM 45223	SM 45224
		court	fermée	–	SM 45231	SM 45232	SM 45233	SM 45234
	Sand	long	fermée	–	SD 45221	SD 45222	SD 45223	SD 45224
		court	fermée	–	SD 45231	SD 45232	SD 45233	SD 45234
	Black	long	fermée	–	SN 45221	SN 45222	SN 45223	SN 45224
		court	fermée	–	SN 45231	SN 45232	SN 45233	SN 45234

VENOSAN® 5000

Classe de compression 2 : Pression à la cheville 23 – 32 mmHg

CCL 2





Article	Couleur	Longueur	Pointe de pied	Bande adhésive	REF / Taille				
					S	M	L	XL	
AD 	Mexico	long	ouverte	–	SG 46001	SG 46002	SG 46003	SG 46004	
		long	fermée	–	SG 46011	SG 46012	SG 46013	SG 46014	
		court	ouverte	–	SG 46021	SG 46022	SG 46023	SG 46024	
		court	fermée	–	SG 46031	SG 46032	SG 46033	SG 46034	
	Marokko	long	ouverte	–	SM 46001	SM 46002	SM 46003	SM 46004	
		long	fermée	–	SM 46011	SM 46012	SM 46013	SM 46014	
		court	ouverte	–	SM 46021	SM 46022	SM 46023	SM 46024	
		court	fermée	–	SM 46031	SM 46032	SM 46033	SM 46034	
	Sand	long	ouverte	–	SD 46001	SD 46002	SD 46003	SD 46004	
		long	fermée	–	SD 46011	SD 46012	SD 46013	SD 46014	
		court	ouverte	–	SD 46021	SD 46022	SD 46023	SD 46024	
		court	fermée	–	SD 46031	SD 46032	SD 46033	SD 46034	
	Black	long	ouverte	–	SN 46001	SN 46002	SN 46003	SN 46004	
		long	fermée	–	SN 46011	SN 46012	SN 46013	SN 46014	
		court	ouverte	–	SN 46021	SN 46022	SN 46023	SN 46024	
		court	fermée	–	SN 46031	SN 46032	SN 46033	SN 46034	
Position de la LiMA : 17.02.01.01.1									
ADH 	Mexico	long	ouverte	noppée	SG 46041	SG 46042	SG 46043	SG 46044	
		long	fermée	noppée	SG 46051	SG 46052	SG 46053	SG 46054	
		court	ouverte	noppée	SG 46061	SG 46062	SG 46063	SG 46064	
		court	fermée	noppée	SG 46071	SG 46072	SG 46073	SG 46074	
	Marokko	long	ouverte	noppée	SM 46041	SM 46042	SM 46043	SM 46044	
		long	fermée	noppée	SM 46051	SM 46052	SM 46053	SM 46054	
		court	ouverte	noppée	SM 46061	SM 46062	SM 46063	SM 46064	
		court	fermée	noppée	SM 46071	SM 46072	SM 46073	SM 46074	
	Black	long	ouverte	noppée	SN 46041	SN 46042	SN 46043	SN 46044	
		long	fermée	noppée	SN 46051	SN 46052	SN 46053	SN 46054	
		court	ouverte	noppée	SN 46061	SN 46062	SN 46063	SN 46064	
		court	fermée	noppée	SN 46071	SN 46072	SN 46073	SN 46074	
	Position de la LiMA : 17.02.01.01.1								

Assortiment standard

VENOSAN® 5000

Classe de compression 2 : Pression à la cheville 23 – 32 mmHg

CCL 2


Article	Couleur	Longueur	Pointe de pied	Bande adhésive	REF / Taille				
					S	M	L	XL	
AGH 	Mexico	long	fermée	ornée	SG 46601	SG 46602	SG 46603	SG 46604	
		long	ouverte	noppée	SG 46611	SG 46612	SG 46613	SG 46614	
		long	fermée	noppée	SG 46621	SG 46622	SG 46623	SG 46624	
		court	fermée	ornée	SG 46631	SG 46632	SG 46633	SG 46634	
		court	ouverte	noppée	SG 46641	SG 46642	SG 46643	SG 46644	
		court	fermée	noppée	SG 46651	SG 46652	SG 46653	SG 46654	
	Marokko	long	fermée	ornée	SM 46601	SM 46602	SM 46603	SM 46604	
		long	ouverte	noppée	SM 46611	SM 46612	SM 46613	SM 46614	
		long	fermée	noppée	SM 46621	SM 46622	SM 46623	SM 46624	
		court	fermée	ornée	SM 46631	SM 46632	SM 46633	SM 46634	
		court	ouverte	noppée	SM 46641	SM 46642	SM 46643	SM 46644	
		court	fermée	noppée	SM 46651	SM 46652	SM 46653	SM 46654	
	Sand	long	fermée	ornée	SD 46601	SD 46602	SD 46603	SD 46604	
		long	ouverte	noppée	SD 46611	SD 46612	SD 46613	SD 46614	
		long	fermée	noppée	SD 46621	SD 46622	SD 46623	SD 46624	
		court	fermée	ornée	SD 46631	SD 46632	SD 46633	SD 46634	
		court	ouverte	noppée	SD 46641	SD 46642	SD 46643	SD 46644	
		court	fermée	noppée	SD 46651	SD 46652	SD 46653	SD 46654	
	Black	long	fermée	ornée	SN 46601	SN 46602	SN 46603	SN 46604	
		long	ouverte	noppée	SN 46611	SN 46612	SN 46613	SN 46614	
		long	fermée	noppée	SN 46621	SN 46622	SN 46623	SN 46624	
		court	fermée	ornée	SN 46631	SN 46632	SN 46633	SN 46634	
		court	ouverte	noppée	SN 46641	SN 46642	SN 46643	SN 46644	
		court	fermée	noppée	SN 46651	SN 46652	SN 46653	SN 46654	
Position de la LIMA : 17.02.01.05.1									
AGG (gauche) 	Mexico	long	ouverte	-	SG 46151	SG 46152	SG 46153	SG 46154	
		long	ouverte	-	SG 46171	SG 46172	SG 46173	SG 46174	
Position de la LIMA : 17.02.01.05.1									
AGG (droit) 	Mexico	long	ouverte	-	SG 46151	SG 46152	SG 46153	SG 46154	
		long	ouverte	-	SG 46171	SG 46172	SG 46173	SG 46174	
Position de la LIMA : 17.02.01.05.1									
AT 	Mexico	long	fermée	-	SG 46221	SG 46222	SG 46223	SG 46224	
		court	fermée	-	SG 46231	SG 46232	SG 46233	SG 46234	
	Marokko	long	fermée	-	SM 46221	SM 46222	SM 46223	SM 46224	
		court	fermée	-	SM 46231	SM 46232	SM 46233	SM 46234	
	Sand	long	fermée	-	SD 46221	SD 46222	SD 46223	SD 46224	
		court	fermée	-	SD 46231	SD 46232	SD 46233	SD 46234	
	Black	long	fermée	-	SN 46221	SN 46222	SN 46223	SN 46224	
		court	fermée	-	SN 46231	SN 46232	SN 46233	SN 46234	
	Position de la LIMA : 17.02.01.07.1								

Assortiment standard

VENOSAN® 5000

Classe de compression 3 : Pression à la cheville 34 – 46 mmHg

CCL 3

Article	Couleur	Longueur	Pointe de pied	Bande adhésive	REF / Taille			
					S	M	L	XL
AD 	Mexico	long	ouverte	-	SG 47001	SG 47002	SG 47003	SG 47004
		long	fermée	-	SG 47011	SG 47012	SG 47013	SG 47014
	Marokko	long	ouverte	-	SM 47001	SM 47002	SM 47003	SM 47004
		long	fermée	-	SM 47011	SM 47012	SM 47013	SM 47014
	Black	long	ouverte	-	SN 47001	SN 47002	SN 47003	SN 47004
		long	fermée	-	SN 47011	SN 47012	SN 47013	SN 47014
Position de la LIMA : 17.03.01.01.1								

Bas sur mesure

VENOSAN® 5000

sur mesure.

Article	Couleur	Pointe de pied	CCL	
			1	2
AD	CCL 1	ouverte/fermée	●	●
ADH	Mexico, Black	ouverte/fermée	●	●
AG	CCL 2	ouverte/fermée	●	●
AGH	Mexico, Marokko, Sand, Black	ouverte/fermée	●	●
AGG+	Mexico, Marokko, Sand, Black	ouverte/fermée	●	●
AT		ouverte/fermée	●	●
ATU Materna		ouverte/fermée	●	●


+ disponible uniquement en Mexico et Black

● = disponible

Article	Couleur	Pointe de pied	CCL	
			1	2
AD	Mexico	ouverte/fermée	●	
ADH		ouverte/fermée	●	
AG		ouverte/fermée	●	
AGH		ouverte/fermée	●	
AGG		ouverte/fermée	●	
AT		ouverte/fermée	●	
ATU Materna		ouverte/fermée	●	

● = disponible

Modèles sur mesure

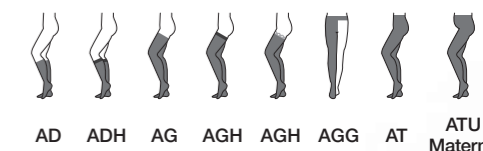

CLASSIC VENOSAN® 6000

Le bas compressif à coût modéré qui satisfait toutes les exigences.


- Légère transparence
- Assise parfaite
- Manipulation simple
- Respecte la norme GZG (Association allemande pour la qualité des bas compressifs médicaux)

Composition

70 % nylon polyamide, 30 % élasthanne



Couleurs

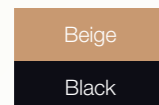




Assortiment standard

VENOSAN® 6000

Classe de compression 2 : Pression à la cheville 23 – 32 mmHg



Article	Couleur	Longueur	Pointe de pied	Bande adhésive	REF / Taille			
					S	M	L	XL
AD 	Beige	long	ouverte	–	CG 62001	CG 62002	CG 62003	CG 62004
		long	fermée	–	CG 62011	CG 62012	CG 62013	CG 62014
		court	ouverte	–	CG 62021	CG 62022	CG 62023	CG 62024
		court	fermée	–	CG 62031	CG 62032	CG 62033	CG 62034
	Black	long	ouverte	–	CN 62001	CN 62002	CN 62003	CN 62004
		long	fermée	–	CN 62011	CN 62012	CN 62013	CN 62014
		court	ouverte	–	CN 62021	CN 62022	CN 62023	CN 62024
		court	fermée	–	CN 62031	CN 62032	CN 62033	CN 62034
Position de la LiMA : 17.02.01.01.1								
AGH 	Beige	long	ouverte	noppée	CG 62601	CG 62602	CG 62603	CG 62604
		long	fermée	noppée	CG 62611	CG 62612	CG 62613	CG 62614
		court	ouverte	noppée	CG 62621	CG 62622	CG 62623	CG 62624
		court	fermée	noppée	CG 62631	CG 62632	CG 62633	CG 62634
	Black	long	ouverte	noppée	CN 62601	CN 62602	CN 62603	CN 62604
		long	fermée	noppée	CN 62611	CN 62612	CN 62613	CN 62614
		court	ouverte	noppée	CN 62621	CN 62622	CN 62623	CN 62624
		court	fermée	noppée	CN 62631	CN 62632	CN 62633	CN 62634
Position de la LiMA : 17.02.01.05.1								
AT 	Beige	long	fermée	–	CG 62211	CG 62212	CG 62213	CG 62214
		court	fermée	–	CG 62231	CG 62232	CG 62233	CG 62234
	Black	long	fermée	–	CN 62211	CN 62212	CN 62213	CN 62214
		court	fermée	–	CN 62231	CN 62232	CN 62233	CN 62234
Position de la LiMA : 17.02.01.07.1								

NATURAL TOUCH VENOSAN® 7000

Fortes fibres naturelles – grande rigidité

■ **Grande rigidité**

Grâce à sa fermeté supérieure – hausse de pression liée à l'augmentation de circonférence due au mouvement musculaire – le bas exerce aussi un effet de massage prononcé sur la jambe.

■ **Agréable à la peau**


La composition de la matière garantit simultanément une grande résistance et un confort de port optimal.

Composition

62 % TACTEL® polyamide, 26 % élasthanne, 8 % coton
4 % SeaCell® (fibre d'algues)



Couleurs

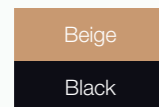

Assortiment standard

VENOSAN® 7000

Classe de compression 1 : Pression à la cheville 18 – 21 mmHg



Article	Couleur	Longueur	Pointe de pied	Bande adhésive	REF / Taille			
					S	M	L	XL
AD	Beige	long	ouverte	–	SG 71001	SG 71002	SG 71003	SG 71004
		long	fermée	–	SG 71011	SG 71012	SG 71013	SG 71014
		court	ouverte	–	SG 71021	SG 71022	SG 71023	SG 71024
		court	fermée	–	SG 71031	SG 71032	SG 71033	SG 71034

VENOSAN® 7000

Classe de compression 2 : Pression à la cheville 23 – 32 mmHg






Article	Couleur	Longueur	Pointe de pied	Bande adhésive	REF / Taille			
					S	M	L	XL
AD	Beige	long	ouverte	–	SG 72001	SG 72002	SG 72003	SG 72004
		long	fermée	–	SG 72011	SG 72012	SG 72013	SG 72014
		court	ouverte	–	SG 72021	SG 72022	SG 72023	SG 72024
		court	fermée	–	SG 72031	SG 72032	SG 72033	SG 72034
	Black	long	ouverte	–	SN 72001	SN 72002	SN 72003	SN 72004
		long	fermée	–	SN 72011	SN 72012	SN 72013	SN 72014
		court	ouverte	–	SN 72021	SN 72022	SN 72023	SN 72024
		court	fermée	–	SN 72031	SN 72032	SN 72033	SN 72034
Position de la LiMA : 17.02.01.01.1								
ADH	Beige	long	ouverte	noppée	SG 72041	SG 72042	SG 72043	SG 72044
		long	fermée	noppée	SG 72051	SG 72052	SG 72053	SG 72054
		court	ouverte	noppée	SG 72061	SG 72062	SG 72063	SG 72064
		court	fermée	noppée	SG 72071	SG 72072	SG 72073	SG 72074
	Black	long	ouverte	noppée	SN 72041	SN 72042	SN 72043	SN 72044
		long	fermée	noppée	SN 72051	SN 72052	SN 72053	SN 72054
		court	ouverte	noppée	SN 72061	SN 72062	SN 72063	SN 72064
		court	fermée	noppée	SN 72071	SN 72072	SN 72073	SN 72074
Position de la LiMA : 17.02.01.01.1								
AGH	Beige	long	ouverte	noppée	SG 72601	SG 72602	SG 72603	SG 72604
		long	fermée	noppée	SG 72611	SG 72612	SG 72613	SG 72614
		court	ouverte	noppée	SG 72621	SG 72622	SG 72623	SG 72624
		court	fermée	noppée	SG 72631	SG 72632	SG 72633	SG 72634
	Black	long	ouverte	noppée	SN 72601	SN 72602	SN 72603	SN 72604
		long	fermée	noppée	SN 72611	SN 72612	SN 72613	SN 72614
		court	ouverte	noppée	SN 72621	SN 72622	SN 72623	SN 72624
		court	fermée	noppée	SN 72631	SN 72632	SN 72633	SN 72634
Position de la LiMA : 17.02.01.05.1								
AGG (gauche)	Beige	long	ouverte	–	SG 72151	SG 72152	SG 72153	SG 72154
		court	ouverte	–	SG 72161	SG 72162	SG 72163	SG 72164
AGG (droit)	Beige	long	ouverte	–	SG 72171	SG 72172	SG 72173	SG 72174
		court	ouverte	–	SG 72181	SG 72182	SG 72183	SG 72184
Position de la LiMA : 17.02.01.05.1								

Assortiment standard

VENOSAN® 7000

Classe de compression 3 : Pression à la cheville 34 – 46 mmHg

CCL 3

Article	Couleur	Longueur	Pointe de pied	Bande adhésive	REF / Taille					
					S	M	L	XL		
AD 	Beige	long	ouverte	–	SG 73001	SG 73002	SG 73003	SG 73004		
		long	fermée	–	SG 73011	SG 73012	SG 73013	SG 73014		
		court	ouverte	–	SG 73021	SG 73022	SG 73023	SG 73024		
		court	fermée	–	SG 73031	SG 73032	SG 73033	SG 73034		
	Black	long	ouverte	–	SN 73001	SN 73002	SN 73003	SN 73004		
		long	fermée	–	SN 73011	SN 73012	SN 73013	SN 73014		
		court	ouverte	–	SN 73021	SN 73022	SN 73023	SN 73024		
		court	fermée	–	SN 73031	SN 73032	SN 73033	SN 73034		
		Position de la LIMA : 17.03.01.01.1								
		ADH 	Beige	long	ouverte	noppée	SG 73041	SG 73042	SG 73043	SG 73044
long	fermée			noppée	SG 73051	SG 73052	SG 73053	SG 73054		
court	ouverte			noppée	SG 73061	SG 73062	SG 73063	SG 73064		
court	fermée			noppée	SG 73071	SG 73072	SG 73073	SG 73074		
Black	long		ouverte	noppée	SN 73041	SN 73042	SN 73043	SN 73044		
	long		fermée	noppée	SN 73051	SN 73052	SN 73053	SN 73054		
	court		ouverte	noppée	SN 73061	SN 73062	SN 73063	SN 73064		
	court		fermée	noppée	SN 73071	SN 73072	SN 73073	SN 73074		
	Position de la LIMA : 17.03.01.01.1									
	AGH 		Beige	long	ouverte	noppée	SG 73601	SG 73602	SG 73603	SG 73604
long		fermée		noppée	SG 73611	SG 73612	SG 73613	SG 73614		
court		ouverte		noppée	SG 73621	SG 73622	SG 73623	SG 73624		
court		fermée		noppée	SG 73631	SG 73632	SG 73633	SG 73634		
Black		long	ouverte	noppée	SN 73601	SN 73602	SN 73603	SN 73604		
		long	fermée	noppée	SN 73611	SN 73612	SN 73613	SN 73614		
		court	ouverte	noppée	SN 73621	SN 73622	SN 73623	SN 73624		
		court	fermée	noppée	SN 73631	SN 73632	SN 73633	SN 73634		
		Position de la LIMA : 17.03.01.05.1								

Bas sur mesure

VENOSAN® 7000

sur mesure.

CCL 2

CCL 3

Article	Couleur	Pointe de pied	CCL 2	CCL 3
AD	Beige, Black	ouverte/fermée	●	●
ADH		ouverte/fermée	●	●
AG		ouverte/fermée	●	●
AGH		ouverte/fermée	●	●
AGG		ouverte/fermée	●	●
AT		ouverte/fermée	●	●
ATH		ouverte/fermée	●	●

● = disponible

Modèles sur mesure



SUCCESSFUL THERAPY VENOSAN® 8000 ULCERFIT

Fortes fibres naturelles – grande rigidité

VENOSAN® 8000 ULCERFIT est un système de bas compressifs médicaux pour le traitement des ulcères de jambe (ulcères cruraux). Le système traitement est composé de deux bas spécialement tricotés. Ces bas se complètent en termes d'effets médicaux et génèrent une configuration de pression spéciale.

■ Sous-bas

Le sous-bas se porte en principe nuit et jour.
Il empêche les pansements de glisser.

■ Sur-bas

Le sur-bas renforce votre traitement durant la journée en garantissant l'application de la pression définie.

Composition

Sur-bas : 62% TACTEL® polyamide, 26% éasthanne, 8% coton, 4% SeaCell®
Sous-bas : 90% polyamide, 10% éasthanne



Couleurs


Sur-bas :	Beige
Sous-bas :	Blanc



Assortiment standard

VENOSAN® 8000 ULCERFIT Sous-bas


Pression à la cheville 10 mmHg

Article	Couleur	Longueur jambe	Pointe de pied	Bande adhésive	REF / Taille			
					S	M	L	XL
AD (Paire) 	Blanc	35 – 42cm	fermée	-	SG 80001	SG 80002	SG 80003	SG 80004

VENOSAN® 8000 ULCERFIT

Classe de compression 2 : Pression à la cheville 23 – 32 mmHg

CCL 2

Article	Couleur	BeinLongueur	Pointe de pied	Bande adhésive	REF / Taille			
					S	M	L	XL
AD (Set*) 	Beige / Blanc*	long 37 – 42cm	Sous-bas : fermée	-	SG 82001	SG 82002	SG 82003	SG 82004
		court 35 – 40cm	Sur-bas : ouverte	-	SG 82021	SG 82022	SG 82023	SG 82024


Position de la LiMA : 17.05.01.00.1

* Set : comprenant un sur-bas (beige) et deux sous-bas (blancs)

VENOSAN® 8000 ULCERFIT

Classe de compression 3 : Pression à la cheville 34 – 46 mmHg

CCL 3

Article	Couleur	Longueur jambe	Pointe de pied	Bande adhésive	REF / Taille			
					S	M	L	XL
AD (Set*) 	Beige / Blanc*	long 37 – 42cm	Sous-bas : fermée	-	SG 83001	SG 83002	SG 83003	SG 83004
		court 35 – 40cm	Sur-bas : ouverte	-	SG 83021	SG 83022	SG 83023	SG 83024

Position de la LiMA : 17.05.01.00.1

* Set : comprenant un sur-bas (beige) et deux sous-bas (blancs)


Comment effectuer une prise de mesures correcte

Bas compressifs médicaux pour le bras

Quand ? En cas de forte tendance aux œdèmes, les mesures sont à prendre le matin.

Comment ? Avec un mètre ruban.

Points de mesures / circonférences

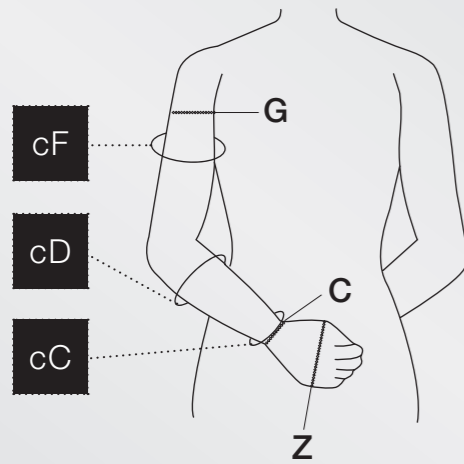


Bas compressifs médicaux pour le bras –
Tableau des tailles

Circonférence du poignet (cm)					
	S	M	L	XL	
cC	14 – 17	17 – 20	20 – 23	23 – 26	
Circonférence de l'avant-bras (cm)					
	S	M	L	XL	
cD	22 – 26	26 – 30	30 – 34	34 – 38	
Circonférence de l'humérus (cm)					
	S	M	L	XL	
cF	24 – 30	30 – 36	36 – 42	42 – 48	
Longueurs (cm)		court	long		
Du poignet (C) au bras (G)		35 – 45	40 – 50		

La longueur se mesure sur le bras tendu.

Variantes de modèles de série et de modèles sur mesure :

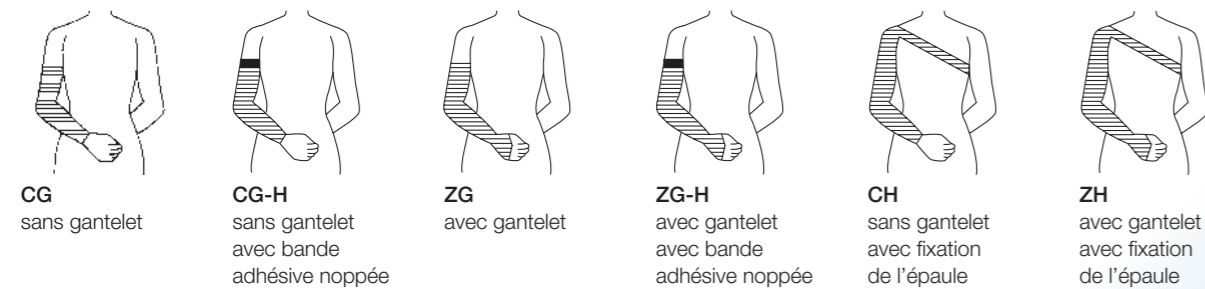

CG sans gantelet
CG-H sans gantelet avec bande adhésive noppée
ZG avec gantelet
ZG-H avec gantelet avec bande adhésive noppée
CH sans gantelet avec fixation de l'épaule
ZH avec gantelet avec fixation de l'épaule

CLIMATE EFFECT


VENOSAN® 4000 MICRO

Microfibre – confortable et à la mode

- **Thermorégulateur**
Grâce à son pouvoir d'évacuation de l'humidité vers l'extérieur, l'effet Tactel® climate assure un confort de port incomparable.
- **Extrêmement élastique**
S'enfile facilement grâce au rapport effort-extension plat de la maille.
- **Confortable**
La matière et l'aspect élégant assurent un confort de port élevé.

Composition du matériel

71 % TACTEL® polyamide, 29 % élasthanne

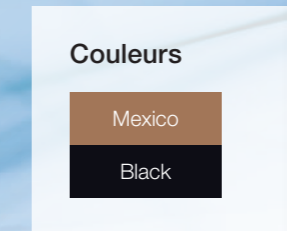

VENOSAN® 4000 MICRO

Classe de compression 2 : Pression au poignet 23 – 32 mmHg



Article	Couleur	Gantelet	REF / Taille				sur mesure
			S	M	L	XL	
CG	Mexico	ouverte	SG 42501	SG 42502	SG 42503	SG 42504	•
	Black	ouverte	SN 42501	SN 42502	SN 42503	SN 42504	•

• = disponible

NATURAL TOUCH VENOSAN® 7000

Fortes fibres naturelles – grande rigidité

■ **Grande rigidité**

Grâce à sa fermeté supérieure – hausse de pression liée à l'augmentation de circonférence due au mouvement musculaire – le bas exerce aussi un effet de massage prononcé sur le bras.

■ **Agréable à la peau**



La composition de la matière garantit simultanément une grande résistance et un confort de port optimal.

Composition

62% TACTEL® polyamide, 26% élasthanne, 8% coton, 4% SeaCell®



Couleurs

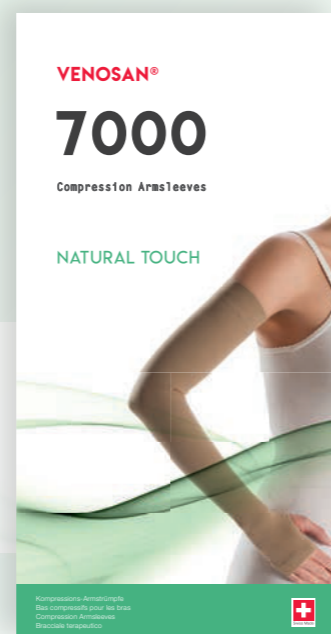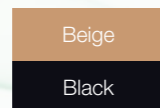

Assortiment standard

VENOSAN® 7000

Classe de compression 2 : Pression au poignet 23 – 32 mmHg

Article	Couleur	Longueur	Gantelet	Bande adhésive	REF / Taille			
					S	M	L	XL
CG	Beige	long	sans		SG 72501	SG 72502	SG 72503	SG 72504
		court	sans		SG 72511	SG 72512	SG 72513	SG 72514
CG-H	Black	long	sans		SN 72501	SN 72502	SN 72503	SN 72504
		court	sans		SN 72511	SN 72512	SN 72513	SN 72514
CG-H	Beige	long	sans	noppée	SG 72521	SG 72522	SG 72523	SG 72524
		court	sans	noppée	SG 72531	SG 72532	SG 72533	SG 72534
CG-H	Black	long	sans	noppée	SN 72521	SN 72522	SN 72523	SN 72524
		court	sans	noppée	SN 72531	SN 72532	SN 72533	SN 72534
ZG	Beige	long	avec		SG 72541	SG 72542	SG 72543	SG 72544
		court	avec		SG 72551	SG 72552	SG 72553	SG 72554
ZG	Black	long	avec		SN 72541	SN 72542	SN 72543	SN 72544
		court	avec		SN 72551	SN 72552	SN 72553	SN 72554
ZG-H	Beige	long	avec	noppée	SG 72561	SG 72562	SG 72563	SG 72564
		court	avec	noppée	SG 72571	SG 72572	SG 72573	SG 72574
ZG-H	Black	long	avec	noppée	SN 72561	SN 72562	SN 72563	SN 72564
		court	avec	noppée	SN 72571	SN 72572	SN 72573	SN 72574
ZH	Beige	long	avec		SG 72581	SG 72582	SG 72583	SG 72584
		court	avec		SG 72591	SG 72592	SG 72593	SG 72594

Bas sur mesure

VENOSAN® 7000

sur mesure.

Article	Couleur	Gantelet	7002 CCL 2	7003 CCL 3
CG	Beige & Black	sans	●	●
CG-H	Beige & Black	sans	●	●
CH	Beige & Black	sans	●	●
ZG	Beige & Black	avec	●	●
ZG-H	Beige & Black	avec	●	●
ZH	Beige & Black	avec	●	●

● = disponible




Classe de compression 2 :
Pression au poignet
23 – 32 mmHg



Classe de compression 3 :
Pression au poignet
34 – 46 mmHg

Modèles sur mesure

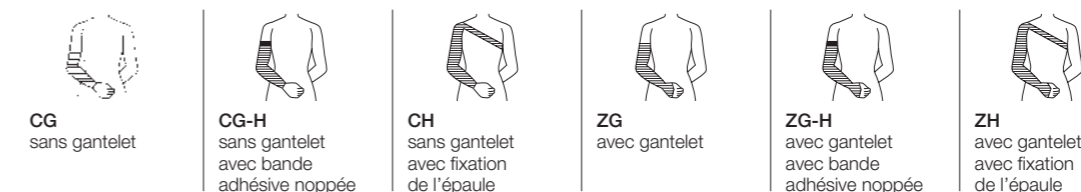

Vue d'ensemble de l'assortiment

Bas de soutien médicaux & chaussettes de voyage

VENOSAN® LEGLINE 20

ELEGANT LUXURY

- Pour des jambes légères au quotidien
- Forme stable, liberté de mouvement maximale
- Aspect transparent
- Confort maximum de porter

Utilisation

- Prévient des varices et des jambes lourdes
- En cas de position assise ou debout fréquente sur le lieu de travail
- Voyages de longue durée (avion, train et voiture)



20 mmHg
140 den

Composition
78% polyamide
22% LYCRA® élasthanne


VENOSAN® LEGLINE 30

ELEGANT LUXURY

- Pour des jambes légères au quotidien
- Forme stable, liberté de mouvement maximale
- Aspect transparent
- Confort maximum de porter

Utilisation

- Prévient des varices et des jambes lourdes
- En cas de position assise ou debout fréquente sur le lieu de travail
- Voyages de longue durée (avion, train et voiture)

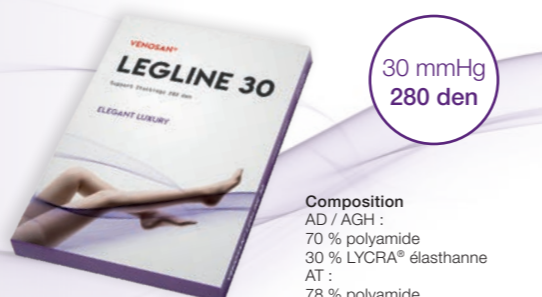

30 mmHg
280 den

Composition
AD / AGH :
70 % polyamide
30 % LYCRA® élasthanne
AT :
78 % polyamide
22 % LYCRA® élasthanne

VENOSAN® SILK SUPPORT

TRAVEL & LEISURE

- Pour des jambes légères au quotidien et en voyage
- Favorise la circulation sanguine
- Prophylaxie efficace contre la thrombose
- Des fibres de soie douces et lisses à même la peau
- Régulation thermique

Utilisation

- Position assise et debout fréquente sur le lieu de travail
- Voyages de longue durée (avion, train et voiture)
- Pour les peaux sensibles ou sèches



15 - 20
mmHg

Composition
65% polyamide
20% élasthanne
15% soie

VENOSAN® COTTON SUPPORT

TRAVEL & LEISURE

- Pour des jambes légères au quotidien et en voyage
- Favorise la circulation sanguine
- Prophylaxie efficace contre la thrombose
- 100 % coton à même la peau
- Sied sous un jean ou un pantalon de costume

Utilisation

- Position assise ou debout fréquente sur le lieu de travail
- Voyages de longue durée (avion, train et voiture)



15 - 20
mmHg

Composition
65% polyamide
20% coton
15% élasthanne

Chaussettes de voyages

VENOSAN® JET LEGS

TRAVEL WITH COMFORT SOCKS

- Compression dégressive (15-20 mmHg)
- Favorise la circulation sanguine
- Prophylaxie efficace contre la thrombose

Utilisation

- Compagnon en avion, train et voiture
- Voyages de longue durée



Composition
86% nylon polyamide
14% LYCRA® élasthanne

Bas anti-embolie

VENOSAN® AES

- Adaptation parfaite grâce à leur forme anatomique
- Codage couleurs permet une détermination simple et sûre de la taille
- Sécurité grâce à la fenêtre de contrôle dans la partie supérieure

Indications

- Prophylaxie pré- et post-opératoire des thromboses et embolies
- Immobilité générale, alitement
- Avant, pendant et après un accouchement




Composition
AD / AGG :
91% Nylon polyamide
9% LYCRA® élasthanne
AGH :
89% Nylon polyamide
11% LYCRA® élasthanne

LEGLINE 20

20 mmHg
140 den

Bas de soutien 140 den

Bas de soutien

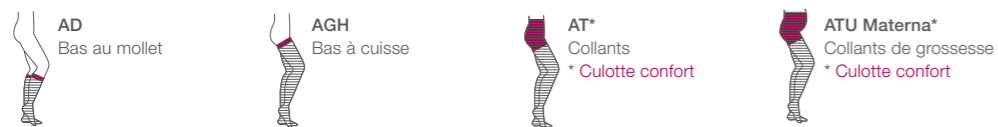


Compression dégressive

Circonférence (cm)

AD	AGH, AT, ATU
	60% 12 mmHg cF
80% 16 mmHg	80% 16 mmHg cD
	cC
100% 20 mmHg	100% 20 mmHg cB

XS	S	M	L	XL
42-44	45-47	48-50	51-53	54-60
29-31	32-34	35-37	38-40	41-43
31-33	34-36	37-39	40-42	43-45
20-21	22-23	24-25	26-27	28-29

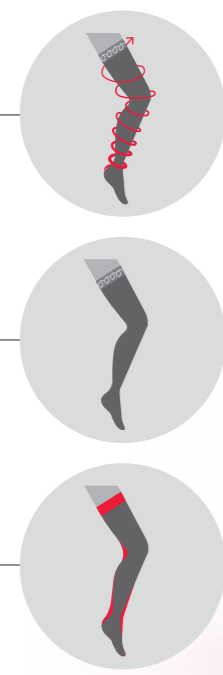

Effective Compression
Évite des jambes enflées

Everyday Elegance
Look transparent

Optimal Comfort
Pour un confort optimal, ne glisse pas

Bande adhésive ornée




Côté endroit



Côté envers


Grandeur

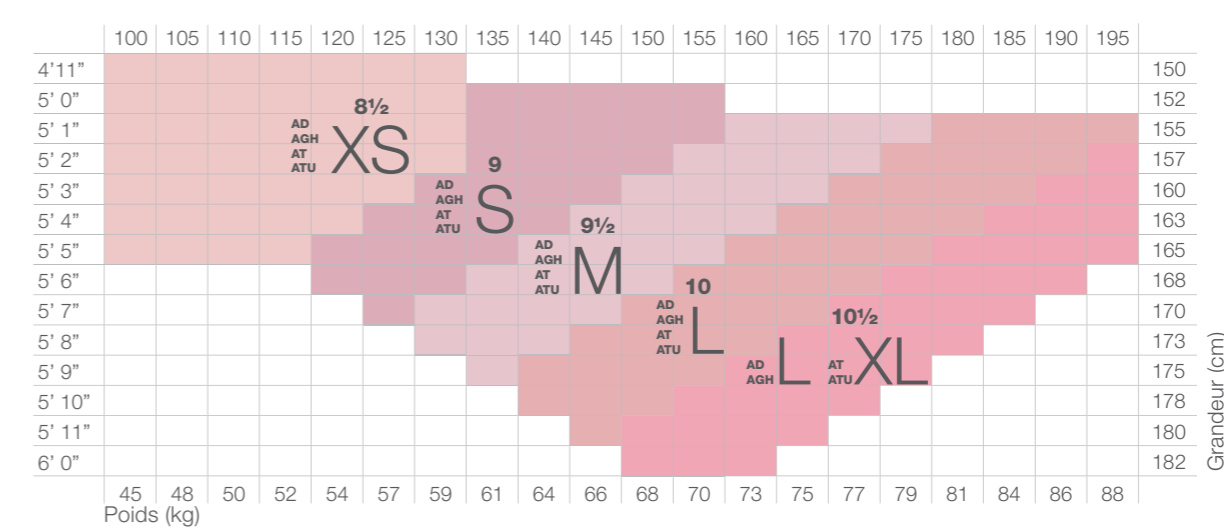

Article

Type	Couleur*	XS	S	M	L	XL
AD	Nude	VL 303 NU	VL 304 NU	VL 305 NU	VL 306 NU	-
	Sahara	VL 303 SA	VL 304 SA	VL 305 SA	VL 306 SA	-
	Black	VL 303 BL	VL 304 BL	VL 305 BL	VL 306 BL	-
AGH	Nude	VL 323 NU	VL 324 NU	VL 325 NU	VL 326 NU	-
	Sahara	VL 323 SA	VL 324 SA	VL 325 SA	VL 326 SA	-
	Black	VL 323 BL	VL 324 BL	VL 325 BL	VL 326 BL	-
AT	Nude	VL 333 NU	VL 334 NU	VL 335 NU	VL 336 NU	VL 337 NU
	Sahara	VL 333 SA	VL 334 SA	VL 335 SA	VL 336 SA	VL 337 SA
	Black	VL 333 BL	VL 334 BL	VL 335 BL	VL 336 BL	VL 337 BL
ATU	Sahara	VL 343 SA	VL 344 SA	VL 345 SA	VL 346 SA	VL 347 SA
	Black	VL 343 BL	VL 344 BL	VL 345 BL	VL 346 BL	VL 347 BL

* Couleurs

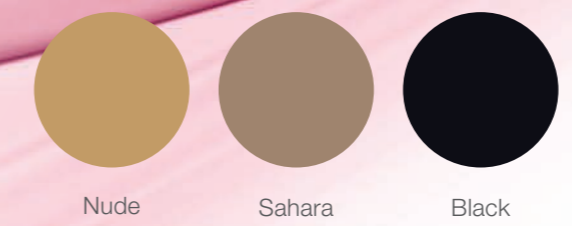

Pour des raisons techniques d'imprimerie, des différences de couleurs sont possibles.

Composition

78 % polyamide | 22 % LYCRA® élasthanne



LEGLINE 30

30 mmHg
280 den

Bas de soutien 280 den

Bas de soutien



Compression dégressive

Circonférence (cm)

AD	AGH, AT	
	60% 18 mmHg	cF
80% 24 mmHg	80% 24 mmHg	cD
		cC
100% 30 mmHg	100% 30 mmHg	cB

XS	S	M	L	XL
42-44	45-47	48-50	51-53	54-60
29-31	32-34	35-37	38-40	41-43
31-33	34-36	37-39	40-42	43-45
20-21	22-23	24-25	26-27	28-29

SWISS COMFORT



Effective Compression
Évite des jambes enflées

Everyday Elegance
Look transparent

Optimal Comfort
Pour un confort optimal, ne glisse pas

Bande adhésive ornée




Côté endroit



Côté envers


Grandeur

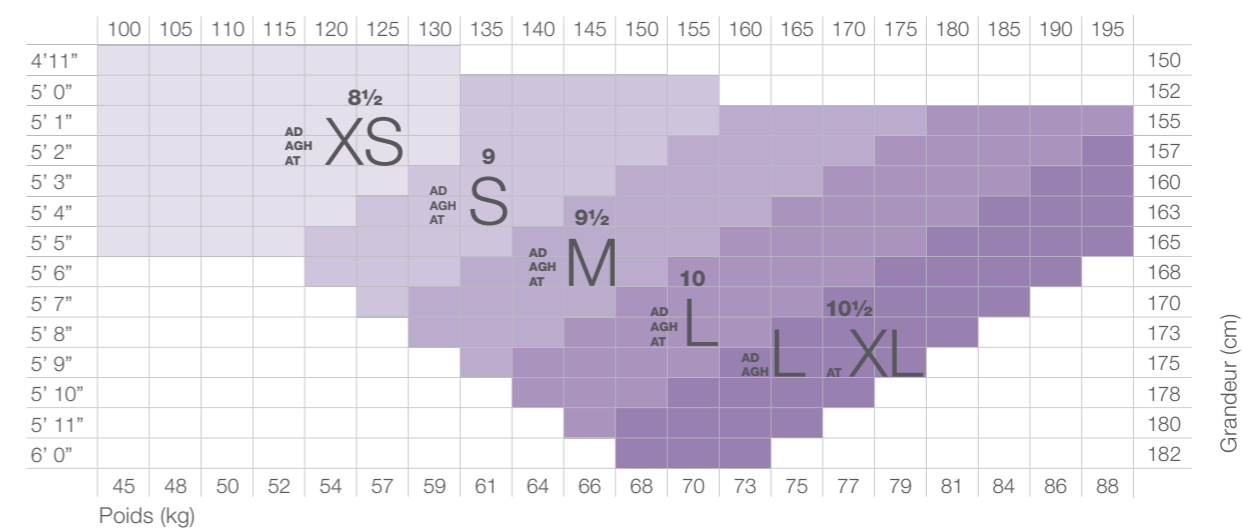

Article

Type	Couleur*	XS	S	M	L	XL
AD	Nude	VL 403 NU	VL 404 NU	VL 405 NU	VL 406 NU	-
	Sahara	VL 403 SA	VL 404 SA	VL 405 SA	VL 406 SA	-
	Black	VL 403 BL	VL 404 BL	VL 405 BL	VL 406 BL	-
AGH	Nude	VL 423 NU	VL 424 NU	VL 425 NU	VL 426 NU	-
	Sahara	VL 423 SA	VL 424 SA	VL 425 SA	VL 426 SA	-
	Black	VL 423 BL	VL 424 BL	VL 425 BL	VL 426 BL	-
AT	Nude	VL 433 NU	VL 434 NU	VL 435 NU	VL 436 NU	VL 437 NU
	Sahara	VL 433 SA	VL 434 SA	VL 435 SA	VL 436 SA	VL 437 SA
	Black	VL 433 BL	VL 434 BL	VL 435 BL	VL 436 BL	VL 437 BL

* Couleurs

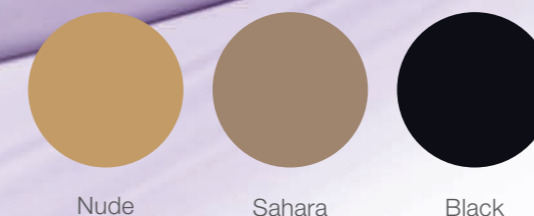

Pour des raisons techniques d'imprimerie, des différences de couleurs sont possibles.

Composition

AD|AGH : 70 % polyamide | 30 % LYCRA® élasthanne
AT : 78 % polyamide | 22 % LYCRA® élasthanne



SILK SUPPORT

15 – 20 mmHg


Bas de soutien • Travel & Leisure

Bas de soutien



Pour des jambes légères sur les longs trajets

Compression dégressive

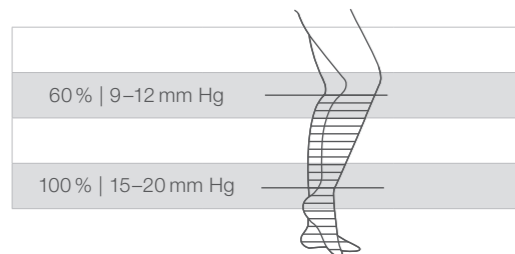


Tailles

	SMALL	MEDIUM	LARGE
EUR	36-39	39-42	42-45

Article


Couleur*	S	M	L
White	SG 58800	SG 58801	SG 58802
Black	SG 58820	SG 58821	SG 58822
Jeans	SG 58870	SG 58871	SG 58872
Marine	SG 58810	SG 58811	SG 58812
Silver	SG 58880	SG 58881	SG 58882
Beige	SG 58840	SG 58841	SG 58842
Apricot	SG 58900	SG 58901	SG 58902
Sisko (Violet)	SG 58910	SG 58911	SG 58912

* Couleurs

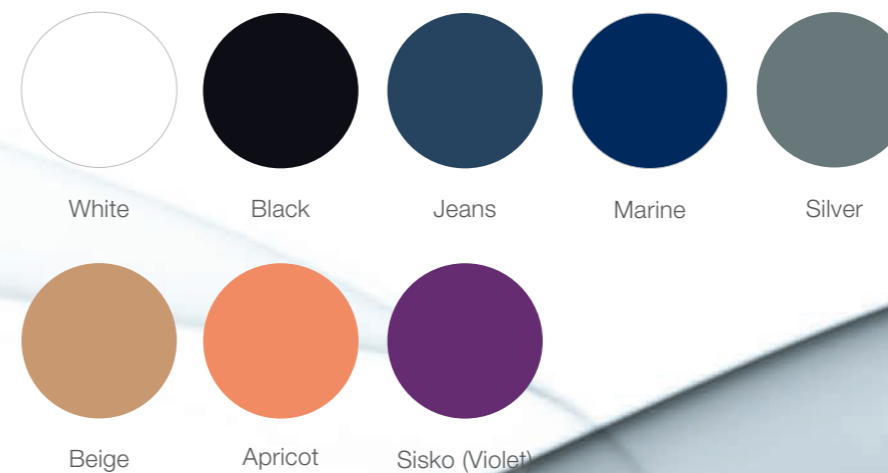

DURABLE COLOURS

Pour des raisons techniques d'imprimerie, des différences de couleurs sont possibles.

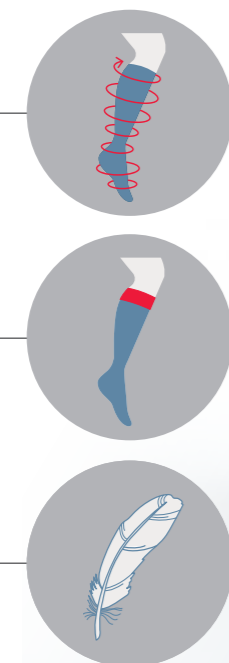

Effective Compression
Évite des jambes enflées

Soft Band
N'altère pas la circulation du sang

Satin Touch
Pour un confort optimal, ne glisse pas

Composition

65 % polyamide | 20 % élasthanne | 15 % soie



COTTON SUPPORT

15 – 20
mmHg


Bas de soutien • Travel & Leisure

Bas de soutien



Pour des jambes légères sur les longs trajets

Compression dégressive

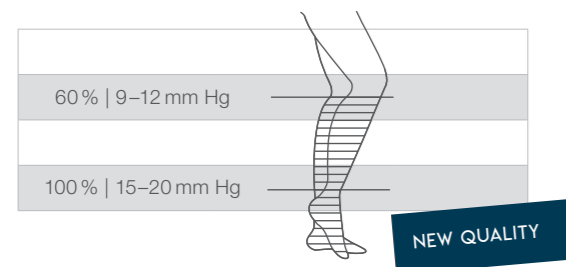


Tailles

	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
EUR	36-39	39-42	42-45	45-48

Article


Couleur*	S	M	L	XL
White	SG 59800	SG 59801	SG 59802	SG 59803
Navy	SG 59810	SG 59811	SG 59812	SG 59813
Black	SG 59820	SG 59821	SG 59822	SG 59823
Beige	SG 59840	SG 59841	SG 59842	SG 59843
Anthracite	SG 59850	SG 59851	SG 59852	SG 59853
Olive	SG 59860	SG 59861	SG 59862	SG 59863
Jeans	SG 59870	SG 59871	SG 59872	SG 59873
Silver	SG 59880	SG 59881	SG 59882	SG 59883
Wood	SG 59890	SG 59891	SG 59892	SG 59893

* Couleurs

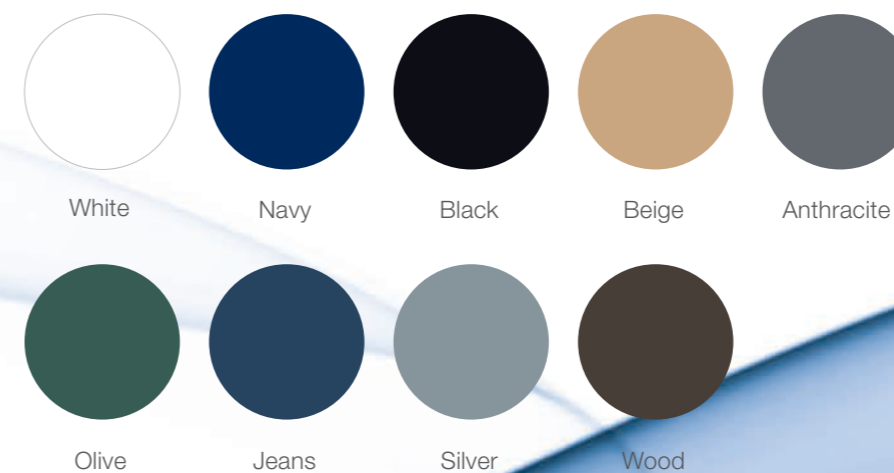

DURABLE COLOURS

Pour des raisons techniques d'imprimerie, des différences de couleurs sont possibles.

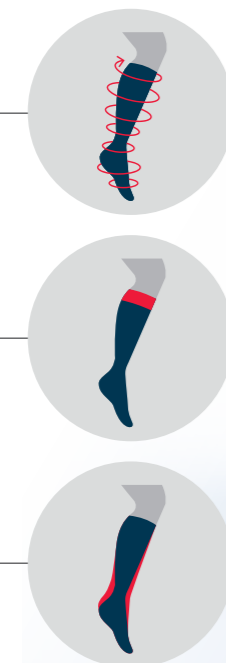

Effective Compression
Évite des jambes enflées

Soft Band
N'altère pas la circulation du sang


Anatomically Knitted
Pour un confort optimal, ne glisse pas

Composition

65 % polyamide | 20 % coton | 15 % élasthanne



Accessoires pour les bas de compression

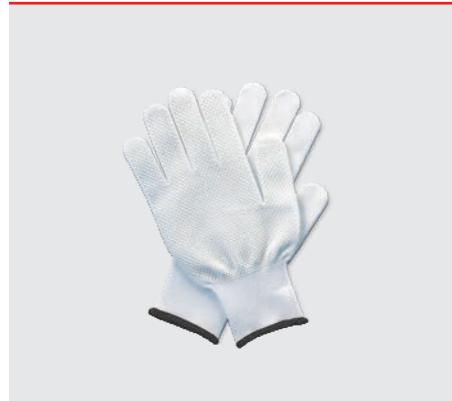

VENOSAN® Dot Gloves

Gants pour enfiler et retirer les bas compressifs médicaux, en deux tailles.

Composition

Tricot: 100 % Nylon polyamide,
Noppes: PVC

REF	1 paire Taille S/M VC 003	1 paire Taille L/XL VC 004



COLTEX Bâton adhésif d'application

Bâton adhésif spécial pour la fixation des bas compressifs médicaux ou des bandages aux jambes et bras.

Composition

PVP/VA Copolymere, Glycerin, Aqua,
5% Isopropyl alcohol, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin

REF	KC 67000	1 pièce



VENO-GLIDER Glisse-pied pour l'enfilage

REF	995345	1 pièce

Soins de la peau lors du traitement compressif



SERVADERM® Lotion

Protection cellulaire révolutionnaire pour votre peau.

Spécifications :

Idéale pour les peaux sèches et irritées causées par la compression. Soigne et apaise la peau et soulage les démangeaisons. Sans colorants, parabène et PEG.

Application :

Convient à tous les types de peau et peut s'utiliser avec des bas médicaux compressifs. Masser quotidiennement avant et après le port des bas de compression sur la peau touchée. En conséquence, les cellules de la peau sont protégées de manière optimale contre la déshydratation.

Composition

Contient 3% huile d'amande, Panthénol, bisabolol, allantoiné, shea butter

REF	152210	1 pièce (150ml)



SERVADERM® Cleansing Foam

Pour la peau, les cheveux et les bas de compression.

Spécifications :

Mousse nettoyante à 2 phases avec des ingrédients optimisés contre les allergènes. Protège contre la déshydratation grâce à l'huile d'amande nourrissante et apaise les peaux irritées. Sans SLS.

Application :

Appliquer la mousse de lavage pour la douche quotidienne. Convient également au lavage à la main des bas de compression. Bien agiter avant utilisation.

Composition

Contient 6% huile d'amande, panthénol, allantoiné

REF	152211	1 pièce (250ml)

S
A
E
S

VENOSAN® AES

Les VENOSAN AES sont très faciles à enfiler et offrent un confort de port élevé grâce à leur activité respiratoire.

- **Adaptation parfaite** grâce à leur forme anatomique et au vaste choix de tailles.
- **Un code couleur** qui permet une détermination simple et sûre de la taille après lavage.
- **Sécurité** grâce à la fenêtre de contrôle dans la partie supérieure.

Composition

AD / AGG : 91% Nylon polyamide, 9% LYCRA® élasthanne
AGH : 89% Nylon polyamide, 11% LYCRA® élasthanne



Couleur

White

Assortiment standard

VENOSAN® AES

Pression à la cheville : 16 – 18 mmHg

Article	Circonférence cheville cB	Circonférence mollet cC	Circonférence cuisse cG	Longueur	Taille	Code couleur taille (orteil)	Code couleur longueur (haut)	REF
AD	18 – 20 cm	< 32 cm		< 41 cm	S normal	jaune	nature	SG 57000
				> 41 cm	S long	jaune	bleu	SG 57001
	20 – 22 cm	32 – 37 cm		< 43 cm	M normal	nature	nature	SG 57002
				> 43 cm	M long	nature	bleu	SG 57003
	23 – 25 cm	37 – 42 cm		< 45 cm	L normal	bleu	nature	SG 57004
				> 45 cm	L long	bleu	bleu	SG 57005
	25 – 27 cm	42 – 47 cm		< 45 cm	XL normal	vert	nature	SG 57006
				> 45 cm	XL long	vert	bleu	SG 57007
	28 – 30 cm	47 – 52 cm		< 45 cm	XXL normal	violet	nature	SG 57008
> 45 cm				XXL long	violet	bleu	SG 57009	
AGH	18 – 20 cm	< 32 cm	45 – 64 cm	< 74 cm	S court	jaune	jaune	SG 57020
				74 – 79 cm	S normal	jaune	nature	SG 57021
				> 79 cm	S long	jaune	bleu	SG 57022
	20 – 22 cm	32 – 37 cm	53 – 71 cm	< 74 cm	M court	nature	jaune	SG 57023
				74 – 79 cm	M normal	nature	nature	SG 57024
				> 79 cm	M long	nature	bleu	SG 57025
	23 – 25 cm	37 – 42 cm	61 – 80 cm	< 74 cm	L court	bleu	jaune	SG 57026
				74 – 79 cm	L normal	bleu	nature	SG 57027
				> 79 cm	L long	bleu	bleu	SG 57028
25 – 27 cm	42 – 47 cm	70 – 84 cm	< 79 cm	XL normal	vert	nature	SG 57029	
			> 79 cm	XL long	vert	bleu	SG 57030	
			AGG	18 – 20 cm	< 32 cm	45 – 64 cm	< 74 cm	S court
74 – 79 cm	S normal	jaune					nature	SG 57051
> 79 cm	S long	jaune					bleu	SG 57052
20 – 22 cm	32 – 37 cm	53 – 71 cm		< 74 cm	M court	nature	jaune	SG 57053
				74 – 79 cm	M normal	nature	nature	SG 57054
				> 79 cm	M ang	nature	bleu	SG 57055
23 – 25 cm	37 – 42 cm	61 – 80 cm	< 74 cm	L court	bleu	jaune	SG 57056	
			74 – 79 cm	L normal	bleu	nature	SG 57057	
			> 79 cm	L long	bleu	bleu	SG 57058	
25 – 27 cm	42 – 47 cm	70 – 84 cm	< 79 cm	XL normal	vert	nature	SG 57059	
			> 79 cm	XL long	vert	bleu	SG 57060	

Conditions générales de vente

Conditions générales de vente

- La gamme de produit est susceptible de changer à tout moment. Les produits présentés par Lohmann & Rauscher dans le catalogue, sur les prospectus ou sur internet ne le sont qu'à titre informatif et ne constituent en rien une offre à caractère obligatoire.
- Les tarifs de la liste de prix sont indicatifs, sous réserve de toute modification tarifaire, changement de condition ou amélioration technique des produits.
- Tous les envois sont effectués à la responsabilité de l'acheteur.
- Le lieu d'exécution pour la livraison et le paiement est 9014 St. Gall.
- Conditions de paiement : 30 jours nets. Sur rappels des factures échues, nous facturons un intérêt de 5 %, tout comme les frais de rappel de CHF 20.-.
- Livraisons échelonnées : Pour les livraisons partielles imputables à Lohmann & Rauscher, le rabais accordé correspond à une livraison unique.
- Les dysfonctionnements de toutes sortes comme les grèves, les incendies, les guerres, les pénuries de matière première et les événements de violence extrême dégagent Lohmann & Rauscher de toute obligation de livraison ponctuelle pour toute la durée dudit événement.
- Si une augmentation tarifaire a lieu alors qu'un contrat de longue durée est encore en cours, les nouveaux tarifs seront appliqués aux quantités restant à livrer. Dans ce cas, l'acheteur dispose d'un droit de résiliation du contrat dans le mois suivant l'annonce de l'augmentation.
- Le solde des articles non retirés à la fin du 12e mois doit être livré et perçu aux tarifs et conditions en vigueur à ce moment-là.
- Les réclamations doivent être émises dès la réception de la marchandise. Si un défaut de fabrication est constaté ou qu'un matériau inadapté a été utilisé, Lohmann & Rauscher s'engage à améliorer ou remplacer dès que possible la marchandise par un produit. Toute autre réclamation de la part de l'acheteur, notamment de dommages ou de résiliation du contrat, est exclue.
- Des frais de traitement à la hauteur des désagréments causés seront appliqués aux retours de marchandise qui n'imputeraient pas Lohmann & Rauscher. Les frais de traitement dépendent de la valeur de la marchandise et s'établissent comme suit :
jusqu'à CHF 100.- : CHF 10.-
jusqu'à CHF 500.- : CHF 50.-
à partir de CHF 500.- : CHF 80.-
Toute marchandise stockée trop longtemps ou invendable ne saurait être reprise (cf. règlement de retour).
- Les commandes sur mesure sont facturées au cas par cas et ne peuvent pas être reprises. L'acheteur accepte toute livraison excédentaire ou incomplète de 10 % par rapport à ce qui était prévu.
- Le matériel de conditionnement n'est pas repris.
- Les présentes conditions générales de vente prévalent sur toutes les conditions antérieures.
- Tout autre condition énoncée par l'acheteur n'est valable que si Lohmann & Rauscher l'a expressément approuvée par écrit.
- Tribunal compétent : 9014 St. Gall

Les prix publics sont fournis à titre indicatif.

Février 2023

Conditions Lohmann & Rauscher AG à partir du 01 février 2023

Critère	Hôpital · Maison de soins · Soins à domicile · Pharmacie · Grossiste	Médecin · Thérapeute
Basis tarifaire	En gros	Médecin
Paiement	30 jours nets	30 jours nets
Montant minimal de facture	CHF 50.-	CHF 50.-
Livraison franco de port	CHF 250.-	CHF 150.-
Supplément livraison rapide	conformément au tarif postal	conformément au tarif postal
Petites livraisons*	entre CHF 50.- et CHF 250.-, les frais d'envoi sont de CHF 12.-	entre CHF 50.- et CHF 150.-, les frais d'envoi sont de CHF 12.-
Supplément palette	Un supplément de CHF 7.- par palette sera facturé en compensation de la RTLP (redevance sur le trafic lourd dépendant des prestations) et des coûts liés à la gestion des palettes.	Un supplément de CHF 7.- par palette sera facturé en compensation de la RTLP (redevance sur le trafic lourd dépendant des prestations) et des coûts liés à la gestion des palettes.

* Livraisons VENOSAN sans frais de port.

Règlement des retours

Règlement relatif aux retours de Lohmann & Rauscher AG

Réf.	Type de retour	Règle	Remboursement
a	Commande erronée	La marchandise reprise dans les 10 jours	Remboursement complet, moins les frais liés aux désagréments subis de CHF 10.- jusqu'à CHF 80.-
b	Suite à une réclamation, la marchandise est défectueuse	La marchandise est reprise	Remboursement complet et remplacement
c	Le client souhaite renvoyer des produits manufacturés individuellement	Marchandise non reprise	Aucun remboursement
d	Produits qui ont déjà été portés, comme par.ex. les bas compressifs médicaux/bas de soutien ou bandages orthopédiques, qui conformément aux prescriptions ne peuvent être ni échangés ni repris.	Marchandise non reprise	Aucun remboursement
e	Produits dont le label ou l'étiquette du produit ont été enlevés (p.ex. bas compressifs médicaux/bandages orthopédiques).	Marchandise non reprise	Aucun remboursement
f	Le produit a été supprimé du programme de vente actuel.	Marchandise non reprise	Aucun remboursement

Règlementations supplémentaires pour les produits qui ont été portés à même à la peau (par ex. bas/bandages) :

a	Les réclamations ne sont acceptés que sur présentation de la marchandise accompagnée du bordereau d'expédition.
b	Les marchandises portées doivent être lavées avant d'être renvoyées et si possible se trouver dans l'emballage original.
c	En cas de confection sur mesure les réclamations et les retours doivent être réalisés au plus tard dans un délai de 4 semaines après réception.
d	Le personnel qualifié qui prend les mesures du bas compressifs médicaux sur le patient est responsable des mesures en cas de commandes similaires ou de nouvelles commandes. Les mesures réalisées correctement seront facturées au client.

Sous réserve d'erreur d'impression et de composition. Valable jusqu'à révocation. Lohmann & Rauscher AG se réserve le droit de modifier les prix indiqués.



Vos commandes

veuillez les envoyer par e-mail à info@ch.LRmed.com
Pour une commande encore plus simple, visitez notre boutique
en ligne : <https://store-ch.LRmed.com>



Notre service clientèle

est toujours à votre disposition pour répondre à toutes vos questions,
par téléphone au **071 274 25 70** et par e-mail à info@ch.LRmed.com